



Svaki ozbiljan incident povezan s ovim pomagalom treba prijaviti kompaniji Tri-Tech Forensics i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi korisnik i/ili pacijent.

MD	Medicinsko pomagalo	UDI	Jedinstveni identifikator pomagala	EC REP	Ovlašten predstavnik za Europu	SN	Serijski broj		Datum proizvodnje
LATEX	Nije izrađeno od prirodnog gumenog lateksa		Proizvođač		Pogledajte upute za upotrebu	LOT	Broj serije		

SAD patenti: 6,394,972 - 6,786,882 - 6,913,587
Zadovoljava standard MIL-STD-810G, 501.5
Evropski patent (DE, FR, UK) br. 3226817
Kanadski patent 3007222

NAMJENA:
Slishman Traction Splint je namijenjen za upotrebu od strane zdravstvenih profesionalaca za stabilizaciju i trakciju preloma femura. Pomagalo se također može koristiti kao jednostavna udaga za bilo koji prelom ekstremiteta, istegnuće ili uganuće.

UPUTE ZA ČIŠĆENJE:
Nakon svake upotrebe, Slishman Traction Splint treba pregledati kako bi se osiguralo da je i dalje u ispravnom stanju. Udaga treba biti temeljito oprana vodom i dezinfekcionim sredstvom, a zatim obrisana čistom krpom. Ako udaga dođe u kontakt s toksinima poput organofosfata, radioaktivnim materijalom ili prekomjernom količinom tjelesnih tekućina, treba je zbrinuti na način prikladan za opasne materijale ili biološki otpad. Ako se može oprati i dezinficirati, ponovna upotreba je prihvatljiva.

Ne koristite izbjeljivač. Nemojte uklanjati niti otpuštati kaiše prilikom čišćenja. Neoprenski kaiš vanjske cijevi ne smije se čistiti toplom vodom jer to može uzrokovati skupljanje ili raslojavanje. Umjesto toga, kaiš temeljito obrisite dezinfekcionim maramicama. STS se treba smatrati neupotrebljivim ako je jako kontaminiran, ako čišćenje zahtijeva pretjerane napore ili ako su pomagalo ili neki od njegovih mehanizama oštećeni tokom upotrebe. Rescue Essentials zamijenit će bilo koji Slishman Traction Splint koji se koristi za obuku, a koji se istroši ili ošteti zbog kontinuirane upotrebe.

UPOZORENJA:
Slishman Traction Splint se može koristiti za pomoć pri imobilizaciji bilo koje povrede kao osnovna udaga. Trakcija se može razmotriti kod preloma kuka, karlice ili humerusa, ako probno povlačenje potezna vrpca pruži trenutno olakšanje boli ili povrat perfuzije. Također, trakciju treba izbjegavati kod izrazito otvorenih i kontaminiranih preloma, gdje trakcija može povećati rizik od unošenja kontaminata u tijelo.

Proizvođač: Tri-Tech Forensics, Inc.
dba Rescue Essentials, 3811 International
Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 SAD

REF #10-0262 NSN: 6515-01-631-3182
NATO: 6515-32-083-5266

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33,
Suite 123 2595AM The Hague
Holandija



North Carolina SAD • 910-830-0286
www.rescue-essentials.com

SLISHMAN TRACTION SPLINT

by

RESCUE ESSENTIALS

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Slishman Traction Splint (STS)

UPUTE ZA UPOTREBU

RESCUE ESSENTIALS



1. Pričvrstite kaiš za gležanj

- Uklonite kaiš za gležanj i završni čep sa šipke.
- Odmotajte kaiš za gležanj i pričvrstite ga tako da završni čep bude postavljen bočno i okrenut prema gore kako bi primio šipku udlage.
- Učvrstite trakom s kukicom i omčom.



NAPOMENA: Kaiš za gležanj se može postaviti iznad lista u slučajevima povrede donjeg dijela noge.





2. Pričvrstite preponski kaiš

- Postavite žensku kopču na prednju stranu butine.
- Omotajte mušku kopču i kaiš iza butine.
- Spojite mušku kopču sa ženskom kopčom i zategnite.



3. Primijenite grubu trakciju

- Produžite distalnu šipku nakon što palcem otpustite vijak na crnoj stezaljki za šipku.
- Umetnite distalnu šipku u završni čep kaiša za gležanj.
- Nakon što postignete željenu dužinu, zategnite vijak palcem.

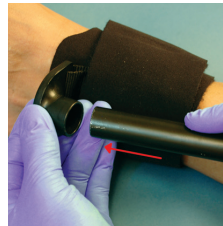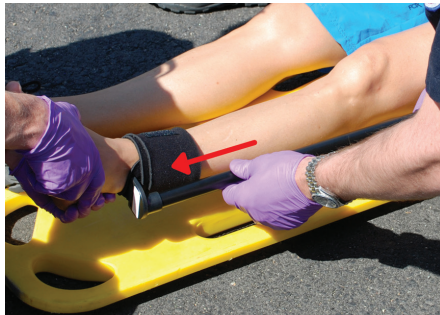

4. Primijenite finu trakciju

- Otpustite vijak palcem na crvenoj stezaljki šipke.
- Povucite užu kako biste primijenili željenu trakciju.
- Palcem zategnite vijak crvene stezaljke šipke i otpustite užu.



5. Ponovo procijenite i pratite

- Ponovo procijenite CMS i nivo boli.
- Prilagodite trakciju po potrebi kako biste smanjili bol, uz održavanje perfuzije.
- Za rotacijsku stabilnost pričvrstite kaiš za srednji dio noge na udlagu i omotajte (jednu ili obje noge) ispod koljena.



PEDIJATRIJSKA PRIMJENA

Za pacijente visine ispod 110 cm (otprilike 43 inča) i/ili starosti od 3 godine ili manje, produžite preponski kaiš kako bi udloga bila postavljena bliže kuku.



NAPOMENA: AKO STEZALJKA SKLIZNE SA ŠIPKE

U slučaju da crvena ili crna stezaljka šipke sklizne sa iste, jednostavno otpustite vijak palcem, gurnite stezaljku nazad preko kraja šipke i poravnajte na označenom mjestu. Zategnite vijak palcem da osigurate stabilnost.

