

NAMJENA:
Slishman Traction Splint namijenjen je zdravstvenim radnicima za upotrebu pri stabilizaciji i trakciji slomljene bedrene kosti. Proizvod se može upotrebljavati i kao jednostavna udloga za svaki prijelom, istegnuće ili uganuće ekstremiteta.

UPUTE ZA ČIŠĆENJE:

Nakon svake upotrebe potrebno je provjeriti je li udloga Slishman Traction Splint i dalje u dobrom radnom stanju. Udlogu je potrebno temeljito očistiti vodom i dezinfekcijskim sredstvom, a potom obrisati čistom krpom. Ako dođe u doticaj s otrovnim tvarima, kao što su organofosfati, radioaktivnim materijalima ili većom količinom tjelesnih tekućina, udlogu je potrebno odložiti u otpad u skladu s uputama za odlaganje opasnih materijala ili biološkog otpada. Ako se može oprati i dezinficirati, može se ponovno upotrebljavati. Nemojte upotrebljavati izbjeljivač. Prilikom čišćenja nemojte uklanjati ni olabavljivati remenje. Neoprenski remen vanjske cijevi ne smije se čistiti vrućom vodom jer bi to moglo uzrokovati skupljanje ili raslojavanje. Remen umjesto toga temeljito prebrišite dezinfekcijskim maramicama. STS valja baciti ako je jako kontaminiran, ako je za čišćenje potreban velik napor ili ako su proizvod ili bilo koji od njegovih mehanizama oštećeni tijekom upotrebe. Rescue Essentials zamijenit će svaki Slishman Traction Splint koji se upotrebljava za obuku, a pri čijoj neprekidnoj upotrebi dođe do habanja ili pucanja.

UPOZORENJA:

Slishman Traction Splint može se upotrebljavati za imobilizaciju svake ozljede kao osnovna udloga. Za prijelome kuka, zdjelice ili ramene kosti može se primijeniti trakcija ako se testnim povlačenjem uže za trakciju odmah umanju bol ili vrati prokrvljenje. U slučaju jako otvorenih i kontaminiranih prijeloma valja izbjegavati trakciju ako bi se njome mogli kontaminanti uvući u tijelo.

Proizvodi Tri-Tech Forensics, Inc.
dba Rescue Essentials 3811 International
Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 SAD

REF #10-0262 NSN: 6515-01-631-3182
NATO: 6515-32-083-5266

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33,
Suite 123 2595AM
The Hague, Nizozemska



North Carolina SAD • 910-830-0286
www.rescue-essentials.com



Svi ozbiljni incidenti povezani s ovim proizvodom moraju se prijaviti tvrtki Tri-Tech Forensics te nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent ima boravište odnosno poslovni nastan.

MD	Medicinski proizvod	UDI	Jedinstveni identifikator proizvoda	EC REP	Ovlašten predstavnik za Europu	SN	Serijski broj		Datum proizvodnje
LATEX	Nije izrađeno od prirodne gume		Proizvođač		Pročitajte upute za uporabu	LOT	Broj serije		

SAD patenti: 6.394.972 – 6.786.882 – 6.913.587
Usklađeno sa standardom MIL-STD-810G, 501.5
Europski patent (DE, FR, UK) br. 3226817
Kanadski patent 3007222

SLISHMAN TRACTION SPLINT

by

RESCUE ESSENTIALS

UPUTE ZA UPORABU

Slushman Traction Splint (STS)

UPUTE ZA UPORABU

RESCUE ESSENTIALS



1. Pričvrstite remen za gležanj

- Uklonite remen za gležanj i završna kapica sa šipke
- Odmotajte remen za gležanj te ga položite tako da završna kapica bude lateralno i okrenuta prema gore da bi se u nju mogla umetnuti šipka udlage
- Pričvrstite čičak-trakom



NAPOMENA: u slučaju ozljede donjeg dijela noge remen za gležanj moguće je položiti iznad lista.




2. Pričvrstite remen za preponu

- Ženski dio kopče položite na prednji dio bedra
- Remen s muški dio kopče omotajte sa stražnje strane bedra
- Umetnite muški dio kopče u ženski i zategnite



3. Primijenite grubu trakciju

- Otpustite vijak na crnoj stezaljci šipke i produljite distalnu šipku
- Umetnite distalnu šipku u završna kapica remen za gležanj
- Kad postignete željenu duljinu, zategnite vijak

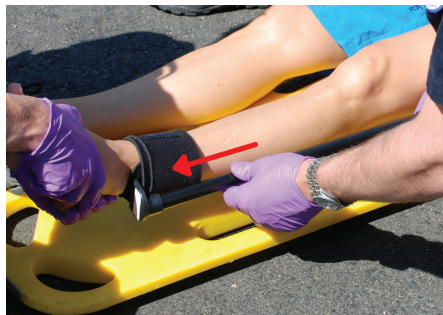

4. Primijenite finu trakciju

- Opustite vijak na crvenoj stezaljci šipke
- Povucite užu da biste primijenili željenu trakciju
- Zategnite vijak na crvenoj stezaljci šipke i pustite užu



5. Ponovno procijenite i nadzirite

- Ponovno procijenite CMS i razinu boli
- Po potrebi namjestite trakciju da biste smanjili bol održavajući pritom prokrvljenost
- Za rotacijsku stabilnost pričvrstite remen za sredinu noge za udlogu te omotajte (jednu ili obje noge) ispod koljena



NAPOMENA: AKO STEZALJKA PADNE SA ŠIPKE

U slučaju da crvena ili crna stezaljka padne sa šipke, samo otpustite vijak i gurnite stezaljku preko kraja šipke te je poravnajte s označenim mjestom. Zategnite vijak da biste je pričvrstili na mjestu.



PEDIJATRIJSKA PRIMJENA

Ako je pacijent niži od 110 cm (približno 43 inča) i/ili mlađi od 3 godine, produljite remen za preponu da bi udloga bila položena proksimalnije u odnosu na kuk.

