

URČENÝ ÚČEL:

Trakční dlahu Slishman Traction Splint je určena pro použití zdravotnickými pracovníky ke stabilizaci a trakci zlomených stehenních kostí. Prostředek lze použít také jako jednoduchou dlahu při jakékoli zlomenině, namožení nebo podvrtnutí končetiny.

POKYNY K ČIŠTĚNÍ:

Po každém použití je potřeba zkontrolovat, zda je trakční dlahu Slishman Traction Splint stále v dobrém funkčním stavu. Dlahu je potřeba důkladně očistit omytím vodou s dezinfekčním prostředkem a poté otřít čistým hadříkem. Pokud se dlahu dostane do kontaktu s toxiny, jako jsou organofosfáty, radioaktivní materiál nebo nadměrné množství tělesných tekutin, měla by se zlikvidovat způsobem, který je považován za vhodný pro nebezpečné materiály nebo biologický odpad. Pokud ji lze umýt a dezinfikovat, je přípustné její opětovné použití. Nepoužívejte bělidlo. Při čištění neodstraňujte ani neuvolněte žádné popruhy. Neoprenový popruh vnější tyče by se neměl čistit horkou vodou, která může způsobit jeho smrštění nebo delaminaci. Místo toho popruh důkladně otřete dezinfekčním ubrouskem. Produkt STS by měl být považován za jednorázový, pokud je hrubě znečištěný, pokud jeho čištění vyžaduje nadměrné úsilí nebo pokud byl prostředek nebo některý z jeho mechanismů při používání poškozen. Společnost Rescue Essentials vymění všechny trakční dlahy Slishman Traction Splint používané při výcviku, které se opotřebovávají nebo zlomí v důsledku nepřetržitého používání.

VAROVÁNÍ:

Trakční dlahu Slishman Traction Splint lze použít jako základní dlahu pro znehybnění jakéhokoli zranění. Trakci lze zvažovat u zlomenin kyčle, pánve nebo pažní kosti, pokud zkušenějším zatažením za trakční šňůru přinese okamžitou úlevu od bolesti nebo obnovení perfuze. Trakci je nutno se vyhnout také u hrubě otevřených a kontaminovaných zlomenin, kde hrozí riziko vtažení kontaminantů do těla.

Vyrábí Tri-Tech Forensics, Inc. podnikající pod názvem Rescue Essentials, 3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA

REF #10-0262



NSN: 6515-01-631-3182

NATO: 6515-32-083-5266



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33,
Suite 123 2595AM Den Haag,
Nizozemsko

RESCUE ESSENTIALS

North Carolina USA • 910-830-0286
www.rescue-essentials.com



Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s tímto prostředkem, je nutno nahlásit společností Tri-Tech Forensics a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí.

MD	Zdravotnický prostředek	UDI	Jedinečný identifikátor prostředku	EC REP	Zaplnovací evropský zástupce	SN	Sériové číslo		Datum výroby
LATEX	Není vyrobeno z přírodního kaučukového latexu		Výrobce		Více návod k použití	LOT	Číslo šarže		

Patenty č. 6 394 972 - 6 786 882 - 6 913 587
V souladu s MIL-STD-810G, 501.5
EP Pat. (DE, FR, UK) č. 3226817
Kanadský patent 3007222

TRAKČNÍ DLAHA SLISHMAN TRACTION SPLINT

by

RESCUE ESSENTIALS

POKYNY K POUŽITÍ

Slishman Traction Splint (STS)

NÁVOD K POUŽITÍ



1. Připevněte kotníkový popruh

- Odstraňte kotníkový popruh a koncovku z tyče
- Rozviňte kotníkový popruh a přiložte jej koncovkou na stranu a směrem nahoru, abyste do ní mohli zasunout tyč dlahy
- Zajistěte pomocí suchého zipu



POZNÁMKA: V případě zranění dolní končetiny lze přiložit kotníkový popruh nad lýtkem.



Před aplikací zhodnoťte funkci CMS (oběh, motoriku a senzoriku) a úroveň bolesti podle místních předpisů.


2. Připevněte tříselný popruh

- Položte dutou část přezky na přední stranu stehna
- Popruh se zástrčnou částí přezky protáhněte pod stehnem
- Obě části přezky zacvakněte a popruh dotáhněte



3. Použijte hrubou trakci

- Po uvolnění křídlového šroubu na černé svorce tyče vysuňte distální tyč
- Vložte distální tyč do koncovky kotníkového pásu
- Po dosažení požadované délky utáhněte křídlový šroub

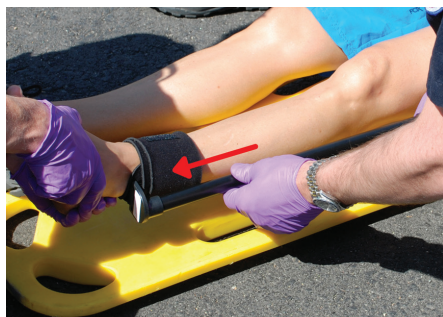

4. Použijte jemnou trakci

- Uvolněte křídlový šroub na červené tyčové svorce
- Tahem za šňůru aplikujte požadovanou trakci
- Utáhněte křídlový šroub na červené tyčové svorce a uvolněte šňůru



5. Znovu vyhodnoťte a sledujte

- Opakovaně vyhodnocujte CMS a úroveň bolesti
- Podle potřeby upravte trakci, abyste minimalizovali bolest a zároveň zachovali perfuzi
- Pro rotační stabilitu připevněte k dlaze popruh na střed a omotejte jej pod kolenem (jedné nebo obou nohou)



POUŽITÍ U DĚTÍ

U pacientů s výškou menší než 110 cm a/nebo ve věku do 3 let prodlužte tříselný popruh tak, aby dlahy spočívala blíže ke kyčli.



POZNÁMKA: POKUD SVORKA SKLOUZNE Z TYČE

V případě, že červená nebo černá tyčová svorka sklouzne z tyče, jednoduše povolte křídlový šroub a zatlačte tyčovou svorku zpět na tyč a vyrovnejte ji na vyznačené místo. Zajistěte utažením křídlového šroubu.

