

## SIHTOTSTARVE

Slishman Traction Splint on mõeldud kasutamiseks tervishoiuspetsialistidele reieluumurrude stabiliseerimiseks ja traktsooniiks. Seadet saab kasutada ka lihtsa lahasena mis tahes jäseme murru, venituse või nikastuse korral.

## PUHASTAMISJUHISED

Pärast iga kasutamist tuleb Slishman Traction Splint kontrollida, veendumaks, et see on endiselt heas töökorras. Lahas tuleb põhjalikult puhastada, pestes vee ja desinfitseerimisvahendiga ning seejärel puhta lapiga pühkida. Kui lahas puutub kokku toksiinidega, nagu organofosfaadid, radioaktiivne materjal või rohked kehavedelikud, tuleb see ohtlike materjalide või bioloogiliste jäätmete jaoks sobival viisil kõrvaldada. Kui seda on võimalik pesta ja desinfitseerida, on lubatud ka korduskasutamine.

Ärge kasutage valgendit. Ärge eemaldage ega lõdvendage riimu puhastamiseks. Välimise toru neopreenrihma ei tohi puhastada kuuma veega, kuna see võib põhjustada kokkutõmbumist või delaminatsiooni. Selle asemel pühkige rihma põhjalikult desinfitseerivate lappidega. STS-i tuleks lugeda ühekordselt kasutatavaks, kui see on tugevalt saastunud, kui puhastamine nõuab ülemäära pingutust või kui seade või mõni selle mehhanism on kasutamise käigus kahjustada saanud. Rescue Essentials asendab kõik treeninguteks kasutatavad Slishman Traction Splint, mis pideva kasutamise tõttu kuluvad või purunevad.

## HOIATUSED

Slishman Traction Splint võib saab kasutada mis tahes vigastuse immobiliseerimiseks põhilahasena. Puusa-, vaagna- või õlavarreluumurdude korral võib kaaluda traktsooni, kui traktsooninööri proovitõmme annab kohese valulevenduse või perfusiooni taastumise. Samuti tuleks vältida traktsooni ulatuslike lahtiste ja saastunud luumurdude puhul, kus traktsooni tõttu võidakse saasteaineid kehasse tõmmata.

Tootnud Tri-Tech Forensics, Inc.  
dba Rescue Essentials 3811 International  
Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA

REF #10-0262 NSN: 6515-01-631-3182  
NATO: 6515-32-083-5266

MedEnvoy Global B.V.  
Prinses Margrietplantsoen 33,  
Suite 123 2595AM The Hague  
Holland



RESCUE ESSENTIALS

North Carolina USA • 910-830-0286  
www.rescue-essentials.com

KANDEKOTT

RESCUE ESSENTIALS

JALA  
KESKOSA  
RIHM

TRAKTSIOONINÖÖR

OTSAKORK

DISTAALNE KLAMBER PROKSIMAALNE KLAMBER

PAHKLUURIHM

KUBEMERIHM

PANDLA  
PULGAOTS

PANDLA  
PESAOTS

Kõigist selle seadmega seoses aset leidnud ohujuhtumitest tuleb teatada ettevõttele Tri-Tech Forensics ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus kasutaja ja/või patsient asub.

|       |                                                     |     |                                                   |        |                                    |     |              |  |                         |
|-------|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-----|--------------|--|-------------------------|
| MD    | Meditsiiniseade                                     | UDI | Seadme kontumant<br>identifitseerimis-<br>numeros | EC REP | Võllitatud<br>esindaja<br>Euroopas | SN  | Seerianumber |  | Võllistamise<br>kuupäev |
| LATEX | Ei ole valmistatud<br>loodusliku<br>kautsukitehnika |     | Tootja                                            |        | Vt<br>kasutusjuhendit              | LOT | Partinumber  |  |                         |

USA patendid: 6 394 972, 6 786 882, 6 913587  
Vastab standardile MIL-STD-810G, 501.5  
Euroopa patent (DE, FR, UK) nr 3226817  
Kanada patent 3007222

# SLISHMAN TRACTION SPLINT

by

RESCUE ESSENTIALS

KASUTAMISJUHISED

# Slushman Traction Splint (STS)

## KASUTUSJUHEND

RESCUE ESSENTIALS



### 1. Pahkluurihma kinnitamine

- Eemaldage vardalt pahkluurihm ja otsakork
- Rullige pahkluurihm lahti ja paigaldage otsakork lateraalselt ning ülespoole, et saada lahase varras
- Kinnitage konksu ja aasaga sidemega



**MÄRKUS** Säärevigastuse korral võib sääre kohal kasutada pahkluurihma.



Enne paigaldamist hinnake CMS (vereringet, mootorset ja sensorset) funktsiooni ning valu taset vastavalt kohalikule protokollile.


### 2. Kinnitage kubemerihi

- Toetage pandla pesaots reie eesmisele küljele
- Viige pandla pulgaots ja rihi reie tagant läbi
- Kinnitage pandla pulgaots pesaotsaga ja pingutage



### 3. Jämeda traktsiooni rakendamine

- Vabastage musta poldi klambri pöidlakruvi ja pikendage distaalset varrast
- Sisestage distaalne varras pahkluurihma otsakorki
- Pärast soovitud pikkuse saavutamist pingutage pöidlakruvi

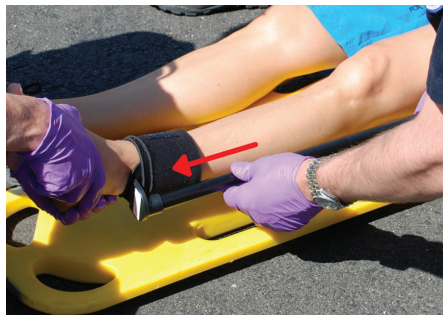

### 4. Peene traktsiooni rakendamine

- Vabastage punase vardaklambri pöidlakruvi
- Soovitud traktsiooni rakendamiseks tõmmake nööri
- Pingutage punase vardaklambri pöidlakruvi ja vabastage nöör



### 5. Kontrollimine ja jälgimine

- Hinnake uuesti CMS-i ja valu taset
- Reguleerige traktsiooni vastavalt vajadusele, et vähendada valu ja säilitades samal ajal perfusioon
- Pöörlemise stabiliseerimiseks kinnitage jala keskosa rihi lahase külge ja mähkige (ühe või mõlema jala) põlve alla



### KASUTAMINE LASTEL

Alla 110 cm (ligikaudu 43 tolli) pikkuste ja/või 3-aastaste või nooremate patsientide puhul pikendage kubemerihi, et lahast puusale lähemale toetada.



### MÄRKUS KUI KLAMBER LIBISEB VARDALT MAHA

Juhul, kui punane või must vardaklamber libiseb vardalt maha, keerake lihtsalt pöidlakruvi lahti ja lükake vardaklamber tagasi üle varda otsa ning joondage näidatud kohas. Pingutage kohale kinnitamiseks pöidlakruvi.

