

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ:

Ο Slishman Traction Splint προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας με σκοπό την σταθεροποίηση και την έλξη καταγμάτων μηριαίου οστού. Το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως απλός νάρθηκας για κάθε κάταγμα, τράβηγμα ή διάστρεμμα άκρου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

Μετά από κάθε χρήση, ο Slishman Traction Splint θα πρέπει να επιθεωρείται προκειμένου να διασφαλίζεται η καλή κατάσταση λειτουργίας του. Ο νάρθηκας θα πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά πλένοντας τον με νερό κι απολυμαντικό και στη συνέχεια θα πρέπει να σκουπίζεται με ένα καθαρό πανί. Εάν ο νάρθηκας έρθει σε επαφή με τοξίνες όπως οργανικά υγρά, τότε ενώσεις, ραδιενεργά υλικά ή υπερβολικά σωματικά υγρά, τότε θα πρέπει να απορρίπτεται όπως κρίνεται κατάλληλο για επικίνδυνα υλικά ή βιολογικά απόβλητα. Εάν μπορεί να πλυθεί και να ξηγανθεί, τότε επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίησή του. Να μη χρησιμοποιείται η χλωρίνη. Να μην αφαιρείτε ή χαλαρώνετε μάντες για τον καθαρισμό. Η χρήση ζεστού νερού για τον καθαρισμό του εξωτερικού μάντα του σωλήνα από neoprene πρέπει να αποφεύγεται, διότι μπορεί να προκαλέσει συρρίκνωση ή αποκόλληση. Αντ' αυτού, σκουπίστε τον μάντα σχολαστικά χρησιμοποιώντας απολυμαντικά μαντηλάκια. Το STS θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προϊόν μίας χρήσης εάν έχει μολυνθεί σε μεγάλο βαθμό, εάν ο καθαρισμός του απαιτεί υπερβολική προσπάθεια ή εάν το προϊόν ή οποιοδήποτε από τους μηχανισμούς του έχει υποστεί βλάβη με τη χρήση. Η Rescue Essentials θα αντικαταστήσει κάθε Slishman Traction Splint που χρησιμοποιείται για επιμορφωτικούς λόγους που υφίσταται φθορά ή θραύση εξαιτίας της συνεχούς χρήσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Ο Slishman Traction Splint μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικός νάρθηκας για την συμβολή της ακινητοποίησης οποιουδήποτε τραυματισμού. Η έλξη μπορεί να εξεταστεί για λύση σε κατάγματα ισχίου, λεκάνης ή βραχιονίου οστών, εάν μια δοκιμή εφελκυσμού του σχοινιού έλξης παρέχει άμεση ανακούφιση από τον πόνο ή επιστροφή της μονιμοποίησης μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Επίσης, η έλξη θα πρέπει να αποφευχθεί για αδρά ανοικτά και μολυσμένα κατάγματα, όπου η έλξη ενδέχεται να προκαλέσει την εισχώρηση μολυσματικών ουσιών στο σώμα.

Κατασκευάζεται από την Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials 3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 ΗΠΑ

REF #10-0262



NSN: 6515-01-631-3182

NATO: 6515-32-083-5266



EC



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33,
Suite 123 2595AM The Hague,
Οι Κάτω Χώρες (Ολλανδία)

RESCUE ESSENTIALS

North Carolina ΗΠΑ • 910-830-0286
www.rescue-essentials.com



Οποιοδήποτε τυχόν σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με αυτό το προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται στην Tri-Tech Forensics και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ο χρήστης ή/κι ο ασθενής.

MD	Κατασκευασμένο προϊόν	UDI	Αποκλειστική κατασκευή κατασκευαστικού προϊόντος	EC REP	Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό συμμόρφωσης	SN	Σειριακός αριθμός		Ημερομηνία κατασκευής
LATEX	Αν κατασκευαστεί από κατεψυγμένο καουτσούκ		Κατασκευαστής		Ευθυλοποιείται για οδηγίες χρήσης	LOT	Αριθμός παρτίδας		

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας των Η.Π.Α.: 6,394,972 - 6,786,882
- 6,913,587 Πληροί τα πρότυπα MIL-STD-810G, 501.5
Ευρωπαϊκής Ευρεσιτεχνίας (DE, FR, UK) αριθ. 3226817
Καναδικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 3007222

SLISHMAN TRACTION SPLINT

by


RESCUE ESSENTIALS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Slishman Traction Splint (STS)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

RESCUE ESSENTIALS

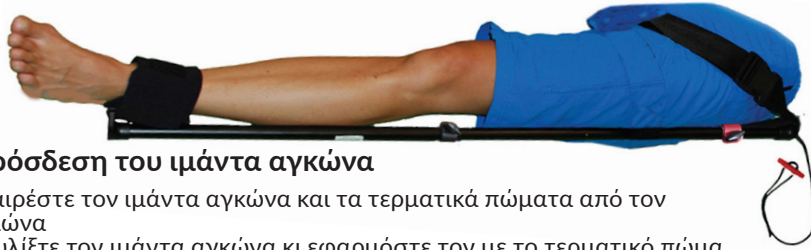

1. Πρόσδεση του ιμάντα αγκώνα

- Αφαιρέστε τον ιμάντα αγκώνα και τα τερματικά πώματα από τον πυλώνα
- Ξετυλίξτε τον ιμάντα αγκώνα κι εφαρμόστε τον με το τερματικό πώμα πλαγίως και με την όψη του να κοιτάζει προς τα πάνω για να δεχτείτε τον πυλώνα του νάρθηκα.
- Ασφαλίστε με γάντζο και θηλιά περιέλιξης



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περιπτώσεις τραυματισμού στο κάτω μέρος του ποδιού, μπορεί να τοποθετηθεί ιμάντας αγκώνα πάνω από τη γάμπα.



Πριν από την εφαρμογή, αξιολογείστε τη λειτουργία των CMS (κυκλοφορία, κίνηση κι αισθητικότητα) και το επίπεδο πόνου σύμφωνα με το εθνικό πρωτόκολλο.



2. Πρόσδεση του ιμάντα βουβωνικής χώρας

- Αφήστε το θηλυκό τμήμα της πόρπης στον πρόσθιο μηρό
- Τυλίξτε το αρσενικό τμήμα της πόρπης και τον ιμάντα πίσω από τον μηρό
- Συνδέστε το αρσενικό με το θηλυκό τμήμα της πόρπης και σφίξτε



3. Εφαρμογή αδρής έλξης

- Επεκτείνετε τον περιφερειακό πυλώνα, αφού απελευθερώσετε την πεταλούδα στον μαύρο σφιγκτήρα του πυλώνα
- Εισάγετε τον περιφερειακό πυλώνα στα τερματικά πώματα του ιμάντα αγκώνα
- Αφού επιτύχετε το επιθυμητό μήκος, σφίξτε την πεταλούδα

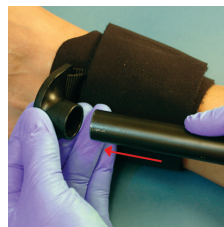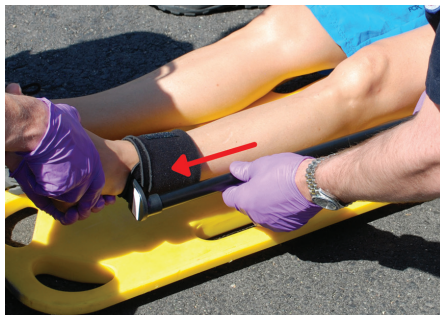

4. Εφαρμογή λεπτής έλξης

- Απελευθερώστε την πεταλούδα στον κόκκινο σφιγκτήρα πυλώνα
- Τραβήξτε το σχοινί για να εφαρμόσετε την επιθυμητή έλξη
- Σφίξτε την πεταλούδα στον κόκκινο σφιγκτήρα πυλώνα κι απελευθερώστε το σχοινί.



5. Επαναξιολόγηση και παρακολούθηση

- Επαναξιολόγηση του CMS και του επιπέδου πόνου
- Ρυθμίστε την έλξη ανάλογα με τις ανάγκες για να ελαχιστοποιήσετε τον πόνο, διατηρώντας παράλληλα την μονιμοποίηση μέσω της κυκλοφορίας του αίματος.
- Για περιστροφική σταθερότητα, συνδέστε τον μεσαίο ιμάντα ποδιών στον νάρθηκα και τυλίξτε (το ένα ή και τα δύο πόδια) κάτω από το γόνατο



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ Ο ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΛΙΣΤΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ

Σε περίπτωση που ο κόκκινος ή ο μαύρος σφιγκτήρας πόλου γλιστρήσει από τον πόλο, απλά χαλαρώστε την πεταλούδα και σπρώξτε τον σφιγκτήρα πόλου πίσω στο άκρο του πόλου και ευθυγραμμίστε τον στο σημείο που υποδεικνύεται.



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Για ασθενείς με ύψος κάτω των 110 εκατοστών (περίπου 43 ίντσες) ή/και ηλικία έως 3 ετών ή μικρότερους, επιμηκύνετε τον ιμάντα βουβωνικής χώρας επιτρέποντας στον νάρθηκα να στηρίζεται πιο κοντά στο ισχίο.



SCAN ME