

RENDELTELTÉS:

A Slishman Traction Splint húzósínt egészségügyi szakemberek használják combcsonttörések stabilizálására és húzására. Az eszköz egyszerű sinként is használható bármely végtagtörés, ficam vagy rándulás esetén.

TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK:

Minden egyes használat után ellenőrizni kell a Slishman Traction Splint húzósínt, hogy megbizonyosodjon annak megfelelő állapotáról. A sínt vízzel és fertőtlenítőszerrel alaposan meg kell tisztítani, majd egy tiszta ruhával letörölni. Ha a sín toxinokkal, például szerves foszfátokkal, radioaktív anyagokkal vagy túlzott mennyiségű testnedvvel kerül érintkezésbe, akkor a veszélyes anyagokra vagy biológiai hulladékokra vonatkozó eljárás szerint ártalmatlanítani kell. Ha a sín mosható és fertőtleníthető, akkor újra fel lehet használni. A tisztításhoz ne használjon fehérítőszeret. Tisztítás céljából ne távolítson el és ne lazítson meg pántokat. A neoprén külső csőpántot nem szabad forró vízzel tisztítani, ez az anyag zsugorodását vagy leválását okozhatja. Ehelyett fertőtlenítő törőlkendővel alaposan törölje át a pántot. Az STS húzósín ártalmatlaníthatónak tekinthető, ha erősen szennyezett, ha a tisztítása túlzott erőfeszítést igényel, vagy ha a használat során az eszköz vagy bármelyik része megrongálódott. A Rescue Essentials vállalat kicseréli az oktatáshoz használt Slishman Traction Splint húzósínt, amely a folyamatos használat miatt elkopik vagy megtörik.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A Slishman Traction Splint alapsínként is használható bármilyen sérülés immobilizálására. Csipő-, medence- vagy felkarcsonttörés esetén megfontolható a húzás alkalmazása, ha a húzósín próbahúzása azonnali fájdalomcsillapítást vagy a perfúzió helyreállítását eredményezi. Húzás nem alkalmazható olyan nyílt és szennyezett törések esetében, ahol a húzás következtében szennyeződések kerülhetnek a testbe.

Gyártó: Tri-Tech Forensics, Inc.
dba Rescue Essentials 3811 International
Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA

REF #10-0262



NSN: 6515-01-631-3182
NATO: 6515-32-083-5266



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33,
Suite 123 2595AM The Hague,
Hollandia

RESCUE ESSENTIALS

North Carolina USA • 910-830-0286
www.rescue-essentials.com

HORDTÁSKA

KÖZÉPSŐ
LÁBSZÁRPÁNT

HÚZÓZSINÓR

ZÁRÓSAPKA

DISZTÁLIS BILINCS

PROXIMÁLIS BILINCS

BOKAPÁNT

ÁGYÉKSZÍ

CSATLAKOZÓ
CSATRÉSZ

Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni kell a Tri-Tech Forensics vállalatnak, valamint a felhasználó és/vagy a beteg tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

MD	Orvostechnikai eszköz	UDI	Egyedi eszközzazonosító	EC REP	Meghatalmazott európai képviselő	SN	Sorozatszám		Cyártás dátuma
	Nem tartalmaz természetes gumi latexet		Gyártó		Tanulmányozza a utasítások	LOT	Tételszám		

USA-beli szabadalmak: 6 394 972 – 6 786 882 – 6 913 587
Megfelel a MIL-STD-810G, az 501.5
3226817 számú európai szabadalom
(DE, FR, UK) előírásainak
Kanadai szabadalom száma: 3007222

SLISHMAN TRACTION SPLINT

by

RESCUE ESSENTIALS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Slishman Traction Splint (STS) HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

RESCUE ESSENTIALS



1. Helyezze fel a bokapántot

- Távolítsa el a bokapántot és a zárósapkát a rúdról
- Tekerje ki a bokapántot és a zárósapkát a lábszár mentén úgy, hogy felfele nézzenek, hogy a sínrudat behelyezhesse
- Rögzítse a tépőzárral



MEGJEGYZÉS: Alsó lábszársérülés esetén a bokapántot a vádli felett is elhelyezheti.



A sín alkalmazása előtt a helyi protokoll szerint értékelje a CMS funkciókat (keringési, motoros és érzékszervi), valamint a fájdalom szintjét.


2. Helyezze fel az ágyékszíjat

- Helyezze a befogató csatrészt a comb elülső részére
- Vezesse el a csatlakozó csatrészt és a pántot a comb mögött
- Csatlakoztassa a csatlakozó csatrészt a befogató csatréshoz, majd húzza meg



3. Állítsa be a rúd hosszúságát

- A fekete rúdkapocs szárnyas csavarjának meglazítása után húzza ki a disztális rudat
- Illessze a disztális rudat a bokapánt zárósapkájába
- A megfelelő hosszúság beállítását követően húzza meg a szárnyas csavart

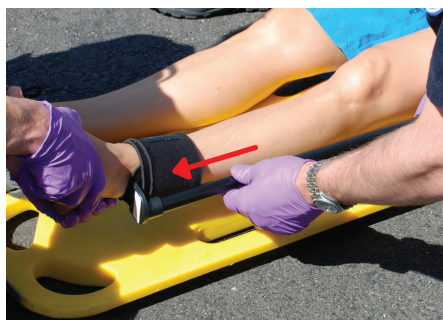

4. Állítsa be a húzóerőt

- Lazítsa meg a piros rúdbilincs szárnyas csavarját
- Húzza meg a zsinórt a kívánt húzóerő eléréséig
- Húzza meg a piros rúdbilincsen lévő szárnyas csavart, majd engedje el a zsinórt



5. Ellenőrizze újra a beteg állapotát

- Ellenőrizze újra a CMS funkciókat és a fájdalom szintjét
- Szükség szerint módosítsa a húzóerőt a fájdalom minimalizálása érdekében, miközben fenntartja a perfúziót
- Az elfordulás megakadályozása érdekében rögzítse a középső lábszárpántot a sínhez, és tekerje a térd alá (egyik vagy mindkét láb alá) below knee



GYERMEKGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁS

A 110 cm (kb. 43 hüvelyk) alatti testmagasságú és/vagy 3 éves vagy annál fiatalabb betegeknél hosszabbítsa meg az ágyékszíjat, hogy a sín a csípőhöz még közelebb helyezkedjen el.



MEGJEGYZÉS: HA A KAPOCS LECSÚSZIK A RÚDRÓL

Abban az esetben, ha a piros vagy fekete rúdkapocs lecsúszik a rúdról, egyszerűen lazítsa meg a csavart, és tolja vissza a rúdkapcsot a rúd végére, majd igazítsa a jelzett helyre.



SCAN ME