

## FYRIRHUGAÐUR TILGANGUR:

Slishman Traction Splint er ætlað til notkunar af heilbrigðisstarfsfólki til að koma á stöðugleika og gripi á lærleggsbrotum. Búnaðinn er einnig hægt að nota sem einfalda spelku fyrir hvers kyns beinbrott, áreynslu eða tognun útlima.

## HREINSUNARLEIÐBEININGAR:

Eftir hverja notkun ætti að skoða Slishman Traction Splint til að tryggja að hún sé enn í góðu ásigkomulagi. Spelkuna skal hreinsa vandlega með vatni og sótthreinsiefni og þurrka síðan af henni með hreinni tusku. Ef spelkan kemst í snertingu við eiturefni eins og lífræn fosföt, geislavirk efni eða óhóflega líkamsvessa skal farga henni eins og þykir viðeigandi fyrir hættuleg efni eða líffræðilegan úrgang.

Ef hægt er að þvo hana og sótthreinsa er endurnotkun ásættanleg. Ekki nota bleikiefni. Ekki fjarlægja eða losa neinar ólar til að þrifa. Ekki ætti að þrifa ytri hólkur með neoprene ól með heitu vatni. Það getur valdið rýrnun eða þynnmyndun. Í staðinn skaltu þurrka ólina vandlega með því að nota sótthreinsandi þurrku. STS ætti að teljast einnota ef hún er mjög óhrein, ef hreinsun krefst mikillar áreynslu eða ef tækið eða eitthvað af búnaði þess skemmdist við notkun. Rescue Essentials mun skipta út Slishman Traction Splint sem notuð er við þjálfun og sem verður fyrir sliti eða broti vegna stöðugar notkunar.

## VIÐVARANIR:

Hægt er að nota Slishman Traction Splint sem grunnspelku fyrir hvers kyns meiðsli. Íhuga má strekkingu fyrir mjaðmar-, mjaðmagrindar- eða upphandleggsbrott ef þú ert á strekkingarbandi veitir tafarlausa verkjastillingu eða endurkomu gegnflæðis. Einnig ætti að forðast strekkingu á grófu, opnu og óhreinu beinbrotti þar sem strekking getur átt á hættu að draga aðskotaefni inn í líkamann.

Framleitt af Tri-Tech Forensics, Inc.  
dba Rescue Essentials 3811 International Blvd  
NE, Ste 100, Leland, NC 28451, Bandaríkjunum

REF #10-0262 NSN: 6515-01-631-3182  
NATO: 6515-32-083-5266

MedEnvoy Global B.V.  
Prinses Margrietplantsoen 33,  
Suite 123 2595AM The Hague,  
Hollandi



RESCUE ESSENTIALS

Norður-Karólína, Bandaríkjunum • 910-830-0286  
www.rescue-essentials.com

BURDARTASKA

LÆRÓL

STREKKINGARBAND

ÖKLAÓL

LOK Á ENDA

KLEMMI SEM ER FJÆR

KLEMMI SEM ER NÆR

NÁRÁÓI

KARLFESTING

KVENFESTING

Öll alvarleg atvik sem hafa átt sér stað í tengslum við þetta tæki ætti að tilkynna til Tri-Tech Forensics og til lögbærs yfirvalds í aðildarríkinu þar sem notandinn og/eða sjúklingurinn hefur staðfestu.

|       |                                           |     |                         |        |                                |     |           |                 |
|-------|-------------------------------------------|-----|-------------------------|--------|--------------------------------|-----|-----------|-----------------|
| MD    | Lækningatæki                              | UDI | Einkuett auðkenni tækis | EC REP | Viðurkennður fulltrúi í Evrópu | SN  | Raðnúmer  | Frameisibúdagur |
| LATEX | Ekki búið til með náttúrulegu gúmmilátexi |     | Frameisibúdagur         |        | Leidd með kunnarleiðbeiningar  | LOT | Lotunúmer |                 |

Bandarísk einkaleyfi: 6.394.972 - 6.786.882 - 6.913.587  
Uppfyllir MIL-STD-810G, 501.5  
Evrópskt einkaleyfi (DE, FR, UK) nr. 3226817  
Kanadískt einkaleyfi 3007222

# SLISHMAN TRACTION SPLINT

by

RESCUE ESSENTIALS

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

# Slishman Traction Splint (STS)

## NOTKUNARLEIÐBEININGAR

RESCUE ESSENTIALS



Fyrir notkun skal meta CMS (hringrás, hreyfigetu og skynjun) og sársaukastig samkvæmt verklagi á staðnum

### 1. Festið öklaól

- Fjarlægjið öklaólina og lokið á endanum af stönginni
- Rúllið öklaólinni út og tryggjið að lokið á endanum snúi til hliðar og upp á við til að taka við spelkustönginni.
- Festið með krók og lykkju



**ATHUGIÐ:** Hægt er að setja öklaól fyrir ofan kálfa ef um er að ræða meiðsli á neðri fótlegg.





### 2. Festið náraól

- Leggið kvenfestinguna á fremra læri
- Vefjið karlfestingunni og ól fyrir aftan læri
- Smellið karl- og kvenfestingunum saman og herðið



### 3. Strekkið gróflega

- Stækkið fjarstöngina eftir að hafa losað þumalskrúfuna á svörtu festingunni á stönginni
- Setjið fjarstöngina í lokið á endanum á öklaólinni
- Eftir að þú hefur náð æskilegri lengd skal herða þumalskrúfuna

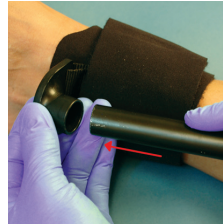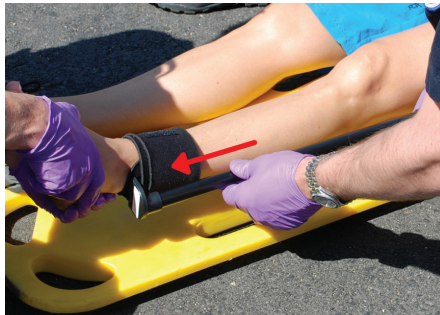

### 4. Strekkið rólega

- Losið þumalskrúfuna á rauðu klemmunni á stönginni
- Togið í bandið til að beita viðeigandi grip
- Herðið þumalskrúfuna á rauðu klemmunni á stönginni og losið bandið



### 5. Endurmetið og fylgist með

- Endurmetið CMS og sársaukastigl
- Stillið grip eftir þörfum til að lágmarka sársauka, en viðhaldið gegnflæði
- Til að tryggja stöðugleika í snúningi skal festa læról á spelkunni og vefja (annan eða báða fætturna) fyrir neðan hné



### NOTKUN VIÐ BARNALÆKNINGAR

Fyrir sjúklinga sem eru lægri en 110 cm (u.þ.b. 43 tommur) á hæð og/eða 3 ára eða yngri skal lengja náraólina þannig að spelkan hvíli nær mjóðminni.



### ATHUGIÐ: EF KLEMMAN RENNUR AF STÖNG

Ef rauða eða svarta klemman á stönginni rennur af skaltu einfaldlega losa þumalskrúfuna og ýta klemmunni aftur yfir enda stangarinnar og stilla þar sem gefið er til kynna. Herðið þumalskrúfuna til að festa hana á sinn stað.



03-1007