

SOMIŅA PĀRŅEŠĀŠANAI



Par jebkuru nopietnu incidentu, kas noticis saistībā ar šo ierīci, jāziņo Tri-Tech Forensics un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs un/vai pacients ir reģistrēts.

MD	Medicīniska ierīce	UDI	Unikālais ierīces identifikators	EC REP	Pilnvarotais pārstāvis Eiropā	SN	Sērijas numurs		Izgatavošanas datums
LATEX	Nesatur dabīgā kaučuka lateksu		Ražotājs		Skatīt lietošanas instrukcijas	LOT	Partijas numurs		

ASV Patenti: 6,394,972 - 6,786,882 - 6,913,587
Atbilst MIL-STD-810G, 501.5
Eiropas Pat. (DE, FR, UK) Nr. 3226817
Kanādas patents 3007222

PAREDZĒTAIS MĒRKIS:

Slushman Traction Splint ir paredzēta lietošanai veselības aprūpes speciālistiem, lai stabilizētu un vilktu augšstilba kaula lūzumus. Ierīci var izmantot arī kā vienkāršu šūnu jebkura ekstremitāšu lūzuma, sastiepuma vai traumas gadījumā.

TĪRĪŠANAS INSTRUKCIJAS:

Pēc katras lietošanas reizes Slushman Traction Splint ir jāpārbauda, lai pārbaudītu, ka tā joprojām ir laba darba stāvoklī. Šī ir rūpīgi jānotīra, mazgājot ar ūdeni un dezinfekcijas līdzekli un pēc tam noslaukot ar tīru drāni. Ja šī nonāk saskarē ar toksīniem, piemēram, organofosātiem, radioaktīviem materiāliem vai pārmērīgiem ķermeņa šķidrumu daudzumiem, tā ir jāiznīcina. Jānodrošina, lai bioloģiskajiem atkritumiem piemērotā veidā. Ja to var nomazgāt un dezinficēt, atkārtota izmantošana ir pieņemama. Nelietojiet balinātājus. Nenovietojiet un neatbrīvojiet siksnas, lai veiktu tīrīšanu. Neopriekšējās caurules siksnu nedrīkst tīrīt ar karstu ūdeni, jo tas var izraisīt saraušanos vai atslāņošanu. Tā vietā rūpīgi noslaukiet siksnu, izmantojot dezinfekcijas salvetes. STS jānoskaidro par vienreiz lietojamu, ja tā ir smagi piesārņota un tās tīrīšanai nepieciešama pārmērīga piepūle vai ja ierīce vai kāds no tās mehānismiem tika bojāts lietošanas laikā. Rescue Essentials aizstāj visas Slushman Traction Splint, kas tiek izmantotas apmācībā un kuras ir nolietojušas vai salūzušas nepārtrauktas lietošanas rezultātā.

BRĪDINĀJUMI:

Slushman Traction Splint var izmantot kā pamata šūnu, lai palīdzētu imobilizēt jebkuru traumu. Gūžas, iegurņa vai pleca kaula lūzumu gadījumā var apsvērt vilkšanu, ja vilkšanas auklas testa vilkšana nodrošina tūlītēju sāpju mazināšanu vai perfūzijas atjaunošanu. Jāizvairās arī no vilkšanas ļoti atvērtu un piesārņotu lūzumu gadījumā, kur vilkšana var izraisīt piesārņotāju ievilkšanu ķermenī.

Ražotājs Tri-Tech Forensics, Inc.
dba Rescue Essentials, 3811 International
Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 ASV

REF #10-0262 NSN: 6515-01-631-3182
NATO: 6515-32-083-5266

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33,
Suite 123 2595AM
The Hague, Nederland



RESCUE ESSENTIALS

North Carolina ASV • 910-830-0286
www.rescue-essentials.com

SLISHMAN TRACTION SPLINT

by

RESCUE ESSENTIALS

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Slushman Traction Splint (STS)

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

RESCUE ESSENTIALS



1. Piestipriniet potītes siksnu

- Noņemiet potītes siksnu un gala vāciņu no stieņa
- Atritiniet potītes siksnu un uzlieciet ar gala vāciņu sāniski un uz augšu, lai ievietotu šinas stieni
- Nostipriniet ar āķa un cilpas saiti



PIEZĪME: apakšstilba traumas gadījumā var piestiprināt potītes siksnu virs ikru muskuļa.



Pirms lietošanas novērtējiet CMS (asinsrites, motorisko un sensoro) funkciju un sāpju līmeni atbilstoši lokālajam protokolam.


2. Piestipriniet cirkšņa siksnu

- Novietojiet sievišķo sprādzi uz augšstilba priekšējās daļas
- Aptiniet vīrišķo sprādzi un siksnu aiz augšstilba
- Iesprādzējiet vīrišķo sprādzi sievišķajā sprādzē un pievelciet



3. Izmantojiet rupjo vilkšanu

- Atlaidiet īkšķskrūvi uz melnā stieņa skavas un izvelciet distālo stieni
- Ievietojiet distālo stieni potītes siksnas gala vāciņā
- Pēc vēlāmā garuma sasniegšanas pievelciet īkšķskrūvi

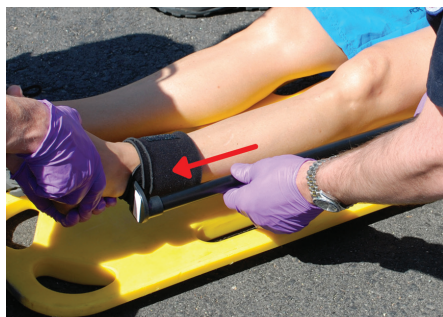

4. Izmantojiet smalko vilkšanu

- Atlaidiet īkšķskrūvi uz sarkanā stieņa skavas
- Pavelciet auklu, lai pielietotu vēlamo vilkšanu
- Pievelciet īkšķskrūvi uz sarkanā stieņa skavas un atlaidiet auklu



5. Atkārtoti novērtējiet un uzraugiet

- Atkārtoti novērtējiet CMS un sāpju līmeni
- Pielāgojiet vilkšanu pēc vajadzības, lai samazinātu sāpes, vienlaikus uzturot perfūziju
- Lai nodrošinātu rotācijas stabilitāti, piestipriniet siksnu starp kājām pie šinas un aptiniet (vienu vai abas kājas) zem ceļgala



LIETOJUMS PEDIATRIJĀ

Pacientiem, kuru augums ir mazāks par 110 cm (aptuveni 43 collas) un/vai vecums 3 gadi vai mazāk, pagariniet cirkšņa siksnu, ļaujot šinai atrasties tuvāk gurnam.



PIEZĪME: JA SKAVA NOSLĪD NO STIEŅA

Ja sarkanā vai melnā stieņa skava noslīd no stieņa, vienkārši atskrūvējiet īkšķskrūvi un spiediet stieņa skavu atpakaļ pāri stieņa galam un salāgojiet, kur norādīts. Pievelciet īkšķskrūvi, lai nostiprinātu to vietā.

