

DESTINAȚIA DE UTILIZARE:

Slushman Traction Splint este destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul medical pentru stabilizarea și tracțiunea fracturilor de femur. Dispozitivul poate fi de asemenea utilizat ca atelă simplă pentru orice fractură, entorsă sau luxație a extremităților.

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE:

După fiecare utilizare, trebuie să se inspecteze Slushman Traction Splint pentru a se asigura faptul că încă este în stare bună de funcționare. Atela trebuie curățată bine prin spălare cu apă și dezinfectant și apoi ștersă cu o cârpă curată. Dacă atela vine în contact cu toxine precum organofosfați, materiale radioactive sau lichide corporale în exces, atunci aceasta trebuie eliminată după cum se consideră oportun pentru materiale periculoase sau deșeuri biologice. Dacă aceasta poate fi spălată și igienizată, atunci este acceptabilă reutilizarea. Nu utilizați înălțător. Nu îndepărtați și nu slăbiți chingile în vederea curățării. Chinga tubului exterior din neopren nu trebuie curățată cu apă caldă, fapt care poate provoca contractarea sau delaminarea. În schimb, ștergeți bine chinga cu șervețele umede dezinfectante. Trebuie să se considere că STS este de unică folosință dacă se contaminează puternic, dacă este necesar un efort considerabil pentru curățare sau dacă dispozitivul sau oricare dintre mecanismele sale au fost deteriorate în urma utilizării. Rescue Essentials va înlocui orice produs Slushman Traction Splint utilizat pentru instruire care s-a uzat sau rupt din cauza utilizării continue.

AVERTISENTE:

Slushman Traction Splint se poate utiliza pentru a ajuta la imobilizarea leziunilor ca atelă de bază. Tracțiunea poate fi luată în considerare pentru fracturile de șold, pelvis sau humerus, dacă o trageră de probă a cordonului de tracțiune asigură ameliorarea imediată a durerii și revenirea perfuziei. De asemenea, tracțiunea trebuie evitată pentru fracturile extrem de deschise și contaminate unde tracțiunea poate prezenta riscul de trageră a contaminanților în corp.

Fabricat de Tri-Tech Forensics, Inc.
dba Rescue Essentials 3811 International
Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 SUA

REF #10-0262



NSN: 6515-01-631-3182

NATO: 6515-32-083-5266



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen
33, Suite 123 2595AM Haga
Țările de Jos

RESCUE ESSENTIALS

North Carolina SUA • 910-830-0286
www.rescue-essentials.com



Orice incident grav produs în legătură cu acest dispozitiv trebuie raportat către Tri-Tech Forensics și autoritatea competentă a statului membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

MD	Dispozitiv medical	UDI	Identificator unic al dispozitivului	EC REP	Reprezentant autorizat pentru Europa	SN	Număr de serie		Data fabricației
LATEX	Nerealizat cu latex din cauciuc natural		Produs		Consultați instrucțiunile de utilizare	LOT	Număr de lot		

Brevete S.U.A.: 6,394,972 - 6,786,882 - 6,913,587
Îndeplinește MIL-STD-810G, 501.5,
brevetul european nr. 3226817 (DE, FR, UK)
Brevetul canadian 3007222

SLISHMAN TRACTION SPLINT

by

RESCUE ESSENTIALS

INDICAȚII DE UTILIZARE

Slushman Traction Splint (STS)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

RESCUE ESSENTIALS



1. Atașați chinga de gleznă

- Îndepărtați chinga de gleznă și capacul final de pe tijă
- Desfășurați chinga de gleznă și aplicați-o cu capacul final în lateral și orientat în sus pentru a prinde tija atelei
- Fixați cu scai



NOTĂ: se poate aplica chinga de gleznă deasupra gambei, în cazuri de leziuni în partea inferioară a piciorului.




2. Atașați chinga pentru zona inghinală

- Sprijiniți catarama mamă pe coapsa anterioară
- Înfășurați catarama tată și chinga în spatele coapsei
- Fixați catarama tată de catarama mamă și strângeți



3. Aplicați tracțiune preliminară

- Extindeți tija distală după ce eliberați șurubul manual de pe clema neagră a tijei
- Introduceți tija distală în capacul final al chingii de gleznă
- După obținerea lungimii dorite, strângeți șurubul manual

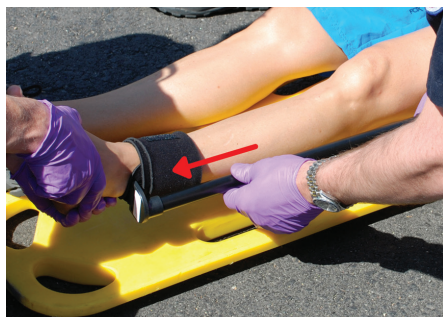

4. Aplicați tracțiune de finețe

- Eliberați șurubul manual de pe clema roșie a tijei
- Trageți de cordon pentru a aplica tracțiunea dorită
- Strângeți șurubul manual pe clema roșie a tijei și eliberați cordonul



5. Reevaluați și monitorizați

- Reevaluați CMS și nivelul de durere
- Reglați tracțiunea după cum este necesar pentru a ameliora durerea, menținând totodată perfuzia
- Pentru stabilitate rotațională, atașați chinga medie pentru picior la atelă și înfășurați-o (în jurul unuia sau ambelor picioare) sub genunchi



NOTĂ: DACĂ CLEMA ALUNECĂ DE PE TIJĂ

În cazul în care clema roșie sau neagră alunecă de pe tijă, pur și simplu slăbiți șurubul manual și împingeți clema înapoi peste capătul tijei și aliniați în locul indicat. Strângeți șurubul manual pentru a-l fixa în poziție.



APLICARE PEDIATRICĂ

Pentru pacienții cu înălțimea sub 110 cm (aprox. 43 inch) și/sau cu vârsta de cel mult 3 ani, prelungiți chinga pentru zona inghinală, permițând atelei să se sprijine mai aproape de șold.

