

НАМЕНА:
Slushman Traction Splint је медицинско средство намењено за употребу од стране здравствених радника за имобилизацију и затезање прелома бутне кости. Медицинско средство се може користити и као једноставна удлага за преломе, истегнућа или уганућа екстремитета

УПУТСТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ:
Након сваке употребе, потребно је прегледати Slushman Traction Splint и проверити да ли је у исправном стању. Удлага се мора темељно опрати водом и дезинфекционим средством, а затим обрисати чистом крпом. Ако дође у контакт са токсинама као што су органофосфати, радиоактивни материјал или прекомерне количине телесних течности, удлага се мора одложити према прописаним упутствима за одлагање опасних материјала или биолошког отпада. Ако се може опрати и дезинфиковати, поновна употреба је прихватљива. Немојте користити избелјивач. Немојте скидати ни попуштати траке приликом чишћења. Трака неорепе на спољној цеви не сме се прати врућом водом, јер то може изазвати скупљање или одвајање материјала. Уместо тога, темељно обришите траку дезинфекционим марамицама. STS не треба поново користити ако је веома контаминиран, ако чишћење захтева велики труд или ако је средство или неки његов механизам оштећен током употребе. Rescue Essentials ће заменити сваки Slushman Traction Splint који се користи за обуку у случају оштећења или кvara услед интензивне употребе.

УПОЗОРЕЊА:
Slushman Traction Splint се може користити за имобилизацију било које повреде као основна удлага. Затезање се може узети у обзир код прелома кука, карлице или надлактице ако пробно повлачење ужета за затезање пружи тренутно ублажавање бола или поновно успостављање прокрвљености. Такође, треба избегавати затезање код отворених и контаминираних прелома због повећаног ризика од уношења контаминаната у тело.

Произвођач: Tri-Tech Forensics, Inc.
dba Rescue Essentials 3811 International Blvd
NE, Ste 100, Leland, NC 28451 САД

REF #10-0262 NSN: 6515-01-631-3182
NATO: 6515-32-083-5266

CE EC REP
MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33,
Suite 123 2595AM The Hague
Холандија

RESCUE ESSENTIALS

North Carolina, САД • 910-830-0286
www.rescue-essentials.com



Сваки озбиљан инцидент у вези са овим медицинским средством треба пријавити компанију Tri-Tech Forensics и надлежном органу државе чланице у којој је корисник и/или пацијент регистрован.

MD	Медицинско средство	UDI	Јединствени идентификатор уређаја	EC REP	Овлашћени заступник за ЕУ	SN	Серијски број		Датум производње
LATEX	Није произведено од природног латекса		Произвођач		Погледајте упутство за употребу	LOT	Број лота		

Патенти у САД: 6.394.972 – 6.786.882 – 6.913.587
У складу са MIL-STD-810G, 501.5
Европски патент (DE, FR, UK) бр. 3226817
Канадски патент 3007222

SLISHMAN TRACTION SPLINT

by


RESCUE ESSENTIALS

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Slushman Traction Splint (STS)

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

RESCUE ESSENTIALS

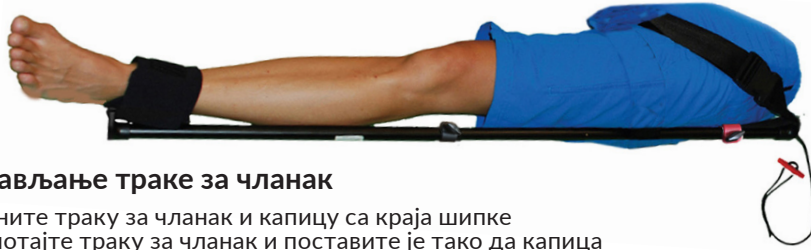

1. Стављање траке за чланак

- Скините траку за чланак и капицу са краја шипке
- Одмотајте траку за чланак и поставите је тако да капица буде окренута бочно и усмерена према горе како би примила шипку удлаге
- Причврстите чичак траком



НАПОМЕНА: Трака за чланак се може поставити изнад листа у случају повреде доњег дела ноге.





2. Стављање траке за препону

- Ставите женску копчу на предњу страну бутине
- Обмотајте мушку копчу и траку иза бутине
- Спојите мушки и женски део копче и затегните



3. Примена грубог затезања

- Одвијте завртањ на црној стезаљци шипке и продужите доњи крај
- Убаците доњи крај шипке у капицу на крају траке за чланак
- Када се постигне жељена дужина, причврстите завртањ

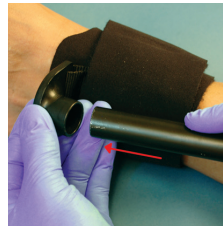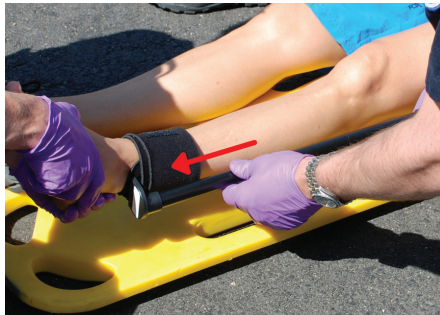

4. Примена финог затезања

- Одвијте завртањ на црвеној стезаљци шипке
- Повуците ужу да бисте применили жељену силу затезања
- Затегните завртањ на црвеној стезаљци шипке и отпустите ужу



5. Поновна провера и праћење

- Поново проверите CMS функције, као и ниво бола
- По потреби прилагодите затезање да би се смањио бол и одржала прокрвљеност
- За ротациону стабилност ставите траку за средину ноге на удлагу и обмотајте је испод колена (око једне или обе ноге)



ПЕДИЈАТРИЈСКА ПРИМЕНА

Код пацијената нижих од 110 cm (приближно 43 инча) и/или млађих од 3 године продужите траку за препону како би се удлага налазила ближе куку.



SCAN ME

НАПОМЕНА: АКО СТЕЗАЉКА СКЛИЗНЕ СА ШИПКЕ

У случају да црвена или црна стезаљка склизне са шипке, једноставно одвијте завртањ, вратите стезаљку назад преко краја шипке и поравнајте је према ознакама. Затегните завртањ да бисте фиксирали.

