

PREDVIDENA UPORABA:

Opornica Slishman Traction Splint je namenjena za uporabo s strani zdravstvenih delavcev za stabilizacijo in trakcijo zlomljenih stegenic. Pripomoček se lahko uporablja tudi kot preprosta opornica pri kakršnem koli zlomu, nategu ali izvinu okončin.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE:

Opornico Slishman Traction Splint morate po vsaki uporabi pregledati, s čimer zagotovite, da je še vedno v dobrem delovnem stanju. Opornico je treba temeljito očistiti s pranjem z vodo in razkužilom, nato pa obrisati s čisto krpo. Če pride opornica v stik s strupenimi snovmi, kot so organofosfati, radioaktivnim materialom ali čezmerno količino telesnih tekočin, jo morate zavreči, kot je primerno za nevarne materiale ali biološke odpadke. Opornico lahko operete in razkužite, nato pa je primerna za ponovno uporabo. Ne uporabljajte belila. Trakov pri čiščenju ne smete odstraniti ali zrahljati. Neoprenskega traku zunanje cevi ne smete čistiti z vročo vodo, ki lahko povzroči krčenje ali delaminacijo. Namesto tega trak temeljito obrišite z razkuževalnimi robčki. Opornica STS je primerna za odstranitev, če je močno kontaminirana, če je pri čiščenju potrebnega veliko napora ali če se je pripomoček oziroma kateri koli mehanizem pripomočka poškodoval med uporabo. Družba Rescue Essentials bo zamenjala vsako opornico Slishman Traction Splint, ki se uporablja za usposabljanje in se obrabi ali zlomi zaradi neprestane uporabe.

OPOZORILA:

Opornica Slishman Traction Splint se lahko uporablja kot osnovna opornica za pomoč pri imobilizaciji kakršne koli poškodbe. O trakciji se lahko razmisli pri zlomih kolka, medenice ali nadlahtnice, če se pri poskusnem vlečenju trakcijske vrvice doseže takojšnje olajšanje bolečine ali se vzpostavi ponovna prekrvavitev. Trakcije se ne sme izvajati pri hudih odprtih in kontaminiranih zlomih, kjer lahko zaradi trakcije pride do tveganja za vlečenje kontaminantov v telo.

Proizvaja družba Tri-Tech Forensics, Inc.
dba Rescue Essentials, 3811 International Blvd NE,
Ste 100, Leland, NC 28451 ZDA

REF #10-0262



NSN: 6515-01-631-3182

NATO: 6515-32-083-5266




MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33,
Suite 123 2595AM The Hague,
Nizozemska

RESCUE ESSENTIALS

North Carolina ZDA • 910-830-0286
www.rescue-essentials.com

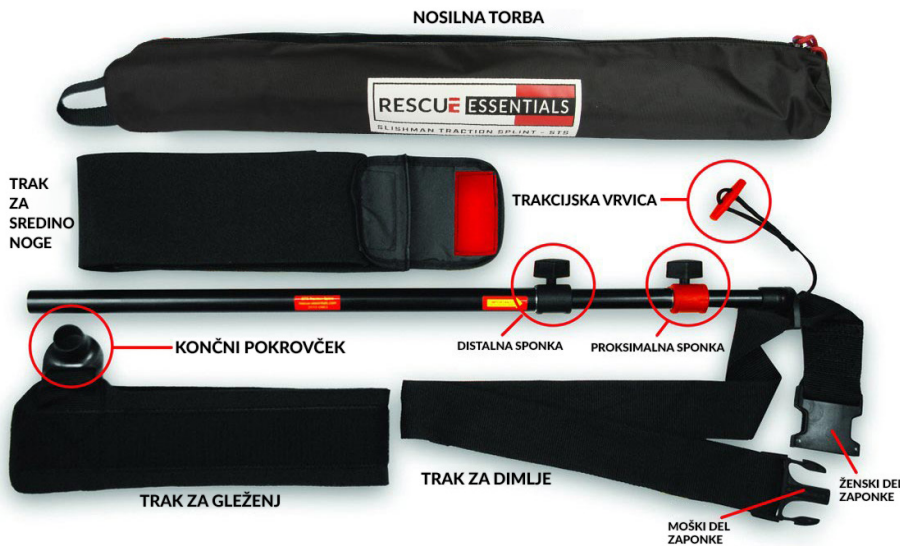

O vsakem resnem zapletu, do katerega pride v povezavi s tem pripomočkom, je treba poročati družbi Tri-Tech Forensics in pristojnemu organu države članice, v kateri prebiva uporabnik in/ali pacient.

MD	Medicinski pripomoček	UDI	Edinstveni identifikator pripomočka	EC REP	Pooblaščen predstavnik za Evropo	SN	Serijska številka		Datum proizvodnje
LATEX	Ni proizvedeno z lateksom iz naravnega kavčuka		Proizvajalec		Glejte navodila za uporabo	LOT	Številka lota		

Patenti ZDA: 6,394,972 - 6,786,882 - 6,913,587
Ustreza MIL-STD-810G, 501.5
Evropski pat. (DE, FR, UK) št. 3226817
Kanadski patent 3007222

SLISHMAN TRACTION SPLINT

by

RESCUE ESSENTIALS

NAVODILA ZA UPORABO

Slushman Traction Splint (STS)

NAVODILA ZA UPORABO

RESCUE ESSENTIALS



1. Pritrditev traku za gleženj

- S palice odstranite trak za gleženj in končni pokrovček.
- Odvijte trak za gleženj in ga namestite tako, da je končni pokrovček lateralno in usmerjen navzgor za namestitev palice opornice.
- Pritrdite ga s povejcem, ki ima kaveljčke in zanke.



OPOMBA: V primeru poškodbe spodnjega dela noge se lahko trak za gleženj namesti nad meča.



Pred namestitvijo ocenite funkcije CMS (prekrvavitev, motorično in senzorično funkcijo) ter stopnjo bolečine skladno z lokalnim protokolom.


2. Pritrditev traku za dimlje

- Ženski del zaponke odložite na anteriorni del stegna.
- Moški del zaponke in trak ovijte za stegno.
- Spnite moški in ženski del zaponke ter zategnite trak.



3. Uporaba grobe trakcije

- Po sprostitvi krilatega vijaka na črni sponki palice podaljšajte distalno palico.
- Distalno palico vstavite v končni pokrovček traku za gleženj.
- Ko dosežete zeleno dolžino, zategnite krilati vijak.

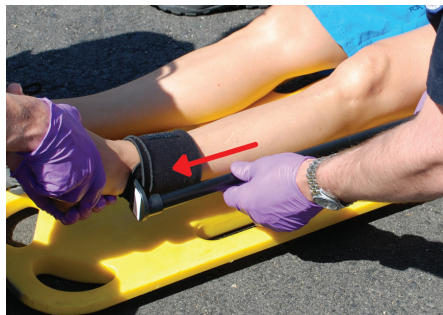

4. Uporaba natančne trakcije

- Odvijte krilati vijak na rdeči sponki palice.
- Povlecite vrvico, da izvedete zeleno trakcijo.
- Zategnite krilati vijak na rdeči sponki palice in izpustite vrvico.



5. Ponovno ocenjevanje in spremljanje

- Ponovno ocenite funkcije CMS in stopnjo bolečine.
- Trakcijo prilagodite, kot je potrebno, da čim bolj zmanjšate bolečino, obenem pa vzdržujete prekrvavitev.
- Za stabilnost proti vrtenju pritrdite trak za sredino noge na opornico in povijte (eno ali obe nogi) pod kolenom.



PEDIATRIČNA UPORABA

Za paciente, ki so nižji od 110 cm (približno 43 palcev) in/ali stari največ 3 leta, podaljšajte trak za dimlje, da boste opornico lahko namestili bolj proksimalno glede na kolk.



OPOMBA: ČE SPONKA ZDRSNE S PALICE

Če rdeča ali črna sponka palice zdrsne s palice, enostavno odvijte krilati vijak in potisnite sponko palice nazaj na konec palice, nato pa jo poravnajte, kot je prikazano. Sponko pritrdite, tako da zategnete krilati vijak.

