


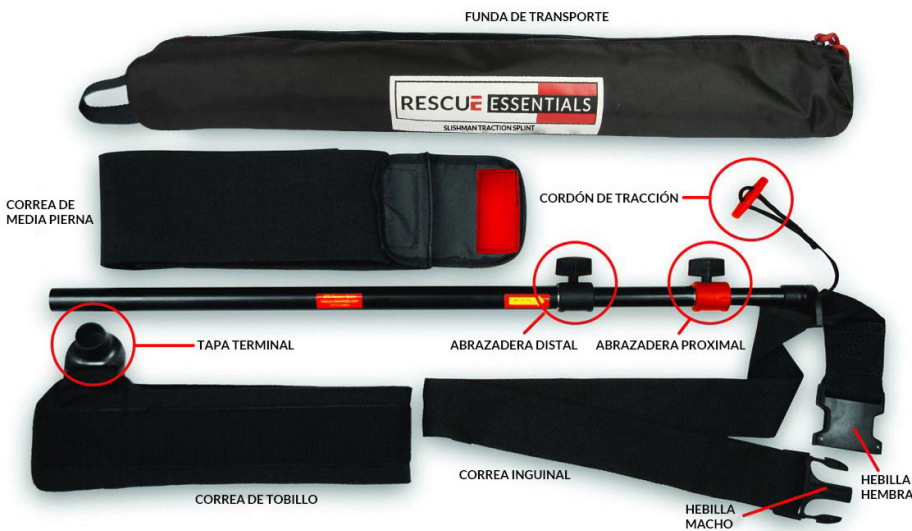

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con este dispositivo debe comunicarse a Tri-Tech Forensics y a la Autoridad Competente del Estado Miembro donde esté establecido el usuario y/o paciente.

MD	Dispositivo médico	UDI	Identificación Única del Producto (UDI)	EC REP	Representante europeo autorizado	SN	Número de serie		Fecha de fabricación
LATEX	Fabricación exenta de látex de caucho natural		Fabricante		Consultar instrucciones de uso	LOT	Número de lote		

Patentes en EE. UU.: 6.394.972 - 6.786.882 - 6.913.587
Cumple MIL-STD-810G, 501.5 Pat. EP (DE, FR, UK) núm. 3226817

Patente canadiense 3007222

FINALIDAD PREVISTA:

Slishman Traction Splint es una férula destinada al uso por profesionales sanitarios para la estabilización y tracción de fémures fracturados. El dispositivo también se puede utilizar como una férula simple para tratar cualquier fractura, distensión o esguince de extremidades.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Slishman Traction Splint se debe revisar después de cada uso para asegurarse de que sigue funcionando correctamente. La férula se debe lavar a fondo con agua y desinfectante y, a continuación, se debe secar con un paño limpio. Si la férula entra en contacto con toxinas como organofosforados, material radiactivo o fluidos corporales excesivos, se debe desechar según se considere apropiado para los materiales peligrosos o residuos biológicos. Si se puede lavar y desinfectar, entonces es aceptable su reutilización. No utilice lejía. No retire ni afloje ninguna correa para su limpieza. La correa del tubo exterior de neopreno no se debe limpiar con agua caliente, ya que el tejido podría encoger o deteriorarse. En su lugar, limpie a fondo la correa con toallitas desinfectantes. STS se debe desechar si está muy contaminada, si su limpieza requiere demasiado esfuerzo o si el dispositivo o alguno de sus mecanismos se ha dañado debido al uso. Rescue Essentials sustituirá cualquier férula Slishman Traction Splint que se haya desgastado o roto debido al uso continuo en prácticas formativas.

ADVERTENCIAS:

Slishman Traction Splint se puede utilizar como una férula básica para ayudar a inmovilizar cualquier lesión. Su efecto tensor se puede contemplar en fracturas de cadera, pelvis o húmero, si al tirar del cordón de tracción se experimenta un alivio inmediato del dolor o retorno de perfusión. Asimismo, se debe evitar la tracción en fracturas abiertas y propensas a infección, donde dicha tracción podría arrastrar contaminantes al interior del cuerpo.

Dispositivo fabricado por Tri-Tech Forensics, Inc.
dba Rescue Essentials 3811 International Blvd
NE, Ste 100, Leland, NC 28451 EE. UU.

REF #10-0262 NSN: 6515-01-631-3182
NATO: 6515-32-083-5266

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33,
Suite 123 2595AM The Hague,
Países Bajos



North Carolina EE. UU. - 910-830-0286
www.rescue-essentials.com

Slishman Traction Splint (STS)



INSTRUCCIONES DE USO

Slishman Traction Splint (STS)

INSTRUCCIONES DE USO



1. Colocar la correa de tobillo

- Retire la correa de tobillo y la tapa terminal de la varilla
- Desenrolle la correa de tobillo y colóquela con la tapa terminal lateral hacia arriba para insertar la varilla de la férula
- Fíjela con el cierre de gancho y bucle



NOTA: se puede colocar una correa en el tobillo por encima de la pantorrilla en caso de lesión en la parte inferior de la pierna.



Antes de su uso, evalúe la función CMS (circulatoria, motora y sensorial) y el nivel de dolor según el protocolo local.



2. Colocar la correa inguinal

- Apoye la hebilla hembra en la parte anterior del muslo
- Envuelva la hebilla macho y la correa detrás del muslo
- Encaje la hebilla macho en la hembra y apriete



3. Aplicar tracción imprecisa

- Extienda la varilla distal después de soltar el tornillo de mariposa en la abrazadera de la varilla negra
- Inserte la varilla distal en la tapa terminal de la correa de tobillo
- Una vez alcanzada la longitud deseada, apriete el tornillo de mariposa

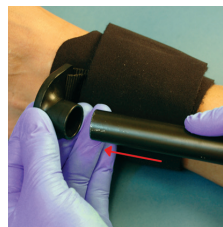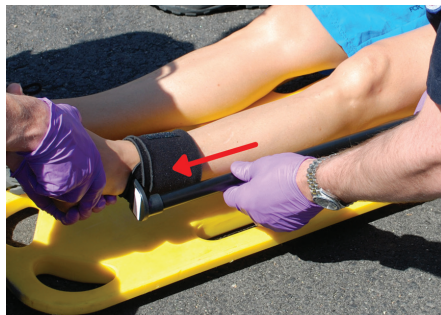

4. Aplicar tracción precisa

- Afloje el tornillo de mariposa de la abrazadera de la varilla roja
- Tire del cordón para aplicar la tracción deseada
- Ajuste el tornillo de la abrazadera de la varilla roja y libere el cordón



5. Reevaluar y controlar

- Reevalúe la función CMS y el nivel de dolor
- Ajuste la tracción según sea necesario para minimizar el dolor, manteniendo al mismo tiempo la perfusión
- Para máxima estabilidad rotacional, fije la correa de media pierna a la férula y envuélvala (a una o ambas piernas) por debajo de la rodilla



APLICACIÓN PEDIÁTRICA

En pacientes de estatura inferior a 110 cm o de 3 años o menos de edad, alargue la correa inguinal permitiendo que la férula descansa más proximal a la cadera.



NOTA: SI LA ABRAZADERA SE SALE DE LA VARILLA

Si la abrazadera de color rojo o negro se sale de la varilla, simplemente afloje el tornillo de mariposa y empuje la abrazadera de nuevo sobre el extremo de dicha varilla y alinéela donde se indica. Apriete el tornillo de mariposa para la fijación en su sitio.

