



Alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med denna produkt ska rapporteras till Tri-Tech Forensics och den behöriga myndigheten i det medlemsland där användaren och/eller patienten befinner sig.

<b>MD</b> Medicinteknisk produkt	<b>UDI</b> Unik produktidentifiering	<b>EC REP</b> Auktoriserad representant i EU	<b>SN</b> Serienummer		Tillverkningsdatum
 Ej tillverkad med naturgummitäta	 Tillverkare	 Läs bruksanvisningen	<b>LOT</b> Lot-nummer		

Patent i USA: 6 394 972 - 6 786 882 - 6 913 587  
Uppfyller MIL-STD-810G, 501.5  
EP Pat. (DE, FR, UK) No. 3226817  
Kanadensisk patent 3007222

#### AVSETT ÄNDAMÅL:

Slishman Traction Splint är avsett att användas av sjukvårdspersonal för stabilisering och sträckbehandling av femurfrakturer. Skenan kan också användas som en enkel skena vid frakturer, sträckningar eller stukningar i extremiteter.

#### RENGÖRINGSANVISNINGAR:

Efter varje användning ska Slishman Traction Splint inspekteras för att säkerställa att den fortfarande är i funktionsdugligt skick. Rengör skenan noggrant genom att tvätta den med vatten och desinfektionsmedel. Torka sedan av den med en ren trasa. Om skenan kommer i kontakt med toxiner som organofosfater, radioaktivt material eller stora mängder kroppsvätskor ska den bortskaffas på det sätt som anses lämpligt för farliga material eller biologiskt avfall. Om den kan tvättas och desinficeras är återanvändning acceptabelt. Använd inte blekmedel. Avlägsna eller lossa inte några band för rengöring. Neoprenbandet på det yttre röret får inte rengöras med hett vatten eftersom det kan leda till delaminering eller att bandet krymper. Torka istället bandet noggrant med desinficerande våtservetter. STS ska betraktas som kasserbar om den är kraftigt kontaminerad, om rengöring är överdrivet arbetskrävande eller om produkten eller någon av dess mekanismer har skadats vid användning. Rescue Essentials kommer att ersätta alla Slishman Traction Splint som använts för utbildning och som är förslitna eller trasiga på grund av kontinuerlig användning.

#### VARNINGAR:

Slishman Traction Splint kan användas som en enkel skena för att immobilisera alla skador. Sträckbehandling kan övervägas för höft-, bäcken- eller humerusfrakturer om ett testdrag i dragskon ger omedelbar smärtlindring eller återställd perfusion. Sträckbehandling ska dessutom undvikas vid stora öppna och kontaminerade frakturer där sträckbehandling kan medföra risk för att kontaminerat förs in i kroppen.

Tillverkad av Tri-Tech Forensics, Inc.  
VUB Rescue Essentials 3811 International  
Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA

**REF** #10-0262 **LATEX** NSN: 6515-01-631-3182  
NATO: 6515-32-083-5266

**CE** **EC REP**   
MedEnvoy Global B.V.  
Prinses Margrietplantsoen 33,  
Suite 123 2595AM The Hague  
Nederländerna

**RESCUE ESSENTIALS**

North Carolina USA • 910-830-0286  
www.rescue-essentials.com

# SLISHMAN TRACTION SPLINT

by

**RESCUE ESSENTIALS**

**BRUKSANVISNING**

# Slishman Traction Splint (STS)

## BRUKSANVISNING

RESCUE ESSENTIALS



**Före applicering ska status för cirkulation, motorik och känsel (CMS) samt smärtnivå bedömas enligt lokalt protokoll.**

### 1. Fäst fotledsband

- Ta bort fotledsbandet och ändstycket från stången
- Rulla ut fotledsbandet och fäst med ändstycket lateralt och vänt uppåt så att skenstängan kan föras in
- Säkra med kardborrebandet



**OBS!** Vid underbensskada kan fotledsbandet appliceras ovanför vaden.





### 2. Fäst ljumskband

- Lägg honspännet på framsidan av låret
- Wrap male buckle and strap behind thigh
- Knäpp ihop spännena och dra åt



### 3. Applicera grovdrag

- Lossa först tumskruven på den svarta stångklämman och skjut ut den distala stängan
- För in den distala stängan i fotledsbandets ändstycke
- Dra åt tumskruven när önskad längd har uppnåtts

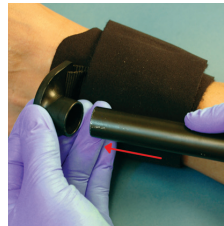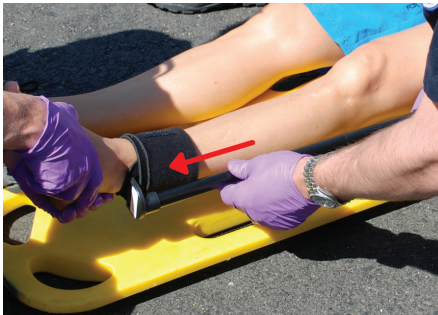

### 4. Finjustera drag

- Lossa tumskruven på den röda stångklämman
- Dra i dragskon för att applicera önskat drag
- Dra åt tumskruven på den röda stångklämman och lossa dragskon



### 5. Gör en ny bedömning och övervaka

- Bedöm status för cirkulation, motorik och känsel samt smärtnivå på nytt
- Justera draget efter behov för att lindra smärta, samtidigt som perfusion bibehålls
- För rotationsstabilitet, fäst mittenbandet på skenan och linda (runt ett eller båda benen) under knäet



### PEDIATRISK ANVÄNDNING

För patienter kortare än 110 cm och/eller 3 år eller yngre förlänger du ljumskbandet så att skenan kan vila mer proximalt i förhållande till höften.



### OBS! OM KLÄMMAN GLIDER AV STÅNGEN

Om den röda eller svarta stångklämman glider av stängan lossar du bara tumskruven och skjuter tillbaka stångklämman över stängens ände och riktar in den så som visas. Dra åt tumskruven för att säkra att den sitter på plats.

