

Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

KÄYTTÖOHJEET

RESCUE ESSENTIALS



1. Jos potilas on pidempi kuin 1,5 m (5 ft), vedä keskimäinen putki uloimmasta putkesta, kunnes jousipainike lukittuu.



2. Kiinnitä putken ulompi neopreeninauha lujasti proksimaalisesti pohkeeseen tai polvilumpioon.



3. Kiinnitä musta haarahihna tiukasti reiden yläosan ympärille.



4. Kiristä hihnaa vetämällä kevyesti, kunnes kipu helpottuu.



5. Lukitse hihna paikalleen vetämällä sitä alaspäin V-koloon sisemmän putken kärjessä.




6. Lukitse vetonauhan vapaa pää kiertämällä kerran kiilasiipien ympäri.



7. Vakauta* ja suojaa loukkaantunut raaja mukavuussyistä.



8. Valvo verenkiertoa, aistimuksia ja motorisia toimintoja (CSM) ja muuta säätöä tarvittaessa.

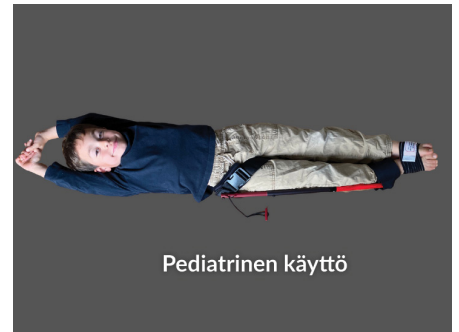

Huomio: Liitä neopreenihihna nilkkaan lyhyillä potilailla ja lapsilla istuvuuden parantamiseksi.

*Vakauttamisen voi suorittaa monilla välineillä mukaan lukien tyyny, huovat, selkähihnat sekä alipaineiset, muotoillut tai ontot lastat. **Slishman Pressure Wrap** on tarkoitettu auttamaan kiertoliikkeen hallinnassa seuraavilla tavoilla:

1. Sido molemmat jalat elastisella kääreellä. Silmukan ei tarvitse olla tiukka.
2. Kääri vastakkainen jalka siten, että molemmat jalat ovat vierekkäin ja mahdollistavat kiertoliikkeen vakauttamisen. Sitoessasi kiinnitä valkoiset koukut mustaan kankaaseen.
3. Jatka kietomista elastisen kankaan loppuun saakka ja kiinnitä valkoiset koukut mustan kankaan etiketin alapuolelle.
4. Kirjoita toimenpiteen teko aika etiketissä olevaan paikkaan, jos se tuntuu tarpeelliselta. (Kietomista voidaan käyttää myös verenvuodon vähentämiseksi kuten muitakin elastisia painesidoksia.)



Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

KÄYTTÖOHJEET

RESCUE ESSENTIALS

KÄYTTÖTARKOITUS:

Slishman Traction Splint on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi murtuneen reisiluun vakauttamiseksi ja vetohoitoon. Laitetta voi käyttää myös yksinkertaisena lastana missä tahansa raajan murtumassa, venähdyksessä tai nyrjähdyksessä.

VAROITUKSET:

Slishman Traction Splintä voi käyttää peruslastana vamman immobilisoinnin apuna. Vetohoitoa voidaan harkita lonkan, lantion tai humerusmurtuman kohdalla, jos vetonauha testivenytys tarjoaa välitöntä kivun lievitystä ja verenkierron palautumista. Vetohoito pitää jättää kokonaan tekemättä avoimissa ja kontaminoituneissa murtumissa, joissa vetohoitoon saattaa liittyä riski kontaminanttien imeytymisestä kehoon.

HUOMAUTUS:

Mistä tahansa vakavasta tapahtumasta, joka on sattunut tämän laitteen käytön yhteydessä, pitää raportoida Tri-Tech Forensics -yhtiölle ja käyttäjän ja/tai potilaan jäsenmaan valtuutetulle viranomaiselle.

PUHDISTUSOHJEET:

Slishman Traction Splint pitää tarkistaa jokaisen käyttökerran jälkeen laitteen hyvän toimintakyvyn varmistamiseksi. Lasta pitää puhdistaa perusteellisesti pesemällä vedellä ja desinfiointiaineella ja sitten pyyhkiä puhtaaksi liinalla. Jos lasta saastuu organofosfaattien, radioaktiivisen materiaalin tai kehon nesteiden kaltaisten kontaminanttien vuoksi, se pitää hävittää vaarallisten materiaalien tai biologisten jätteiden edellyttämällä tavalla. Uudelleenkäyttö on sallittua, mikäli lastan voi pestä ja desinfioida. Älä käytä valkaisuainetta. Älä irrota tai löysää hihnoja puhdistusta varten. Putken ulompaa neopreeninauhaa ei pidä puhdistaa kuumalla vedellä, koska se voi kutistua tai sen laminointi voi vahingoittua. Pyyhi hihna sen sijaan perusteellisesti desinfioivilla pyyhkeillä. STS on katsottava kertakäyttöiseksi, jos se on kauttaaltaan kontaminoitunut, jos puhdistus vaatii huomattavasti työtä tai jos laite tai jokin sen mekanismeista ovat vahingoittuneet käytössä. Rescue Essentials korvaa kaikki Slishman Traction Splint -tuot, jotka ovat kuluneet tai särkyneet jatkuvassa käytössä.

STS-C-KOMPONENTIT



Valmistaja Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials,
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA

REF #10-1270

NSN #6515-01-694-7603

Patenttinro: USA 11,324,624 B2, patentin päiväys: 05102022

Valmistettu USA:n patenteilla 10,517,750 ja 11,324,624

Eurooppapatentti (DE, FR, UK) No. 3226817 suojattuna

• Kanadan patentti 3007222



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Alankomaat

MD	Lääkinnällinen laite	UDI	Yksilöllinen laitetunniste	EC REP	Valtuutettu edustaja Euroopassa	SN	Sarjanumero		Valmistuspäivä
LATEX	Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumi-lateksia		Valmistaja		Katso käyttöohjeita	LOT	Eränumero		