


Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ


RESCUE ESSENTIALS

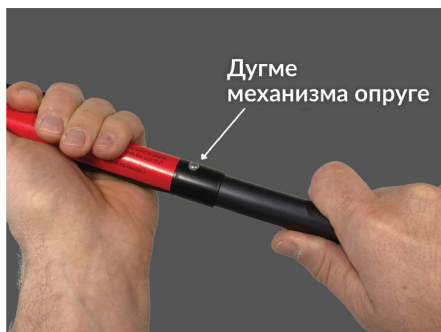

1. Код пацијената виших од 1,5 m (5 ft) извучите средњу цев из спољне цеви све док се дугме механизма опруга не активира.



2. Чврсто затегните траку неоргене на спољној цеви непосредно изнад листа или пателе.

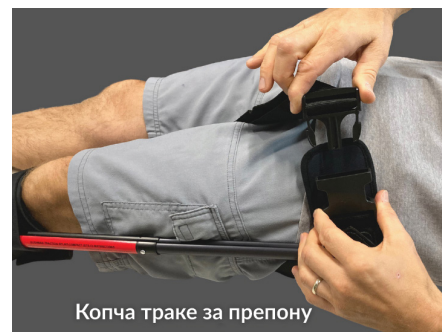


3. Ставите црну траку за препону и подесите је тако да чврсто обухвати горњи део бутине.



4. Лагано повлачите ужу за затезање све док се бол не ублажи.



5. Фиксирајте ужу повлачењем надолу у V-зарез на врху унутрашње цеви.

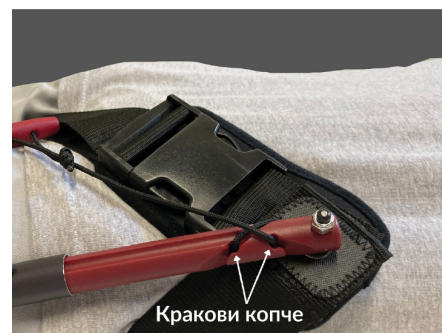


6. Обмотајте слободни крај ужета за затезање једном око оба крака копче да бисте га обезбедили.



7. Имобилизите* повређену ногу и ублажите бол помоћу меких облога.



8. Редовно проверавајте циркулацију, сензорне и моторне функције (CSM) екстремитета и по потреби подесите.

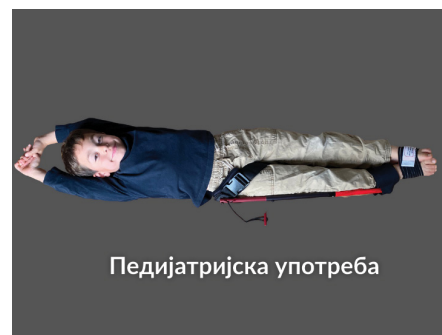

Напомена: Код нижих пацијената или деце, по потреби ставите траку неоргене на чланак ради бољег фиксирања.

*Стабилизација се може остварити многим средствима, укључујући јастуке, ћебад, каишеве за фиксирање на дасци за превоз, вакуумске удлаге, савиљиве удлаге или кутијасте удлаге. Slishman Pressure Wrap се додаје за ротациону стабилност на основу следећих корака:

1. Ставите омчу еластичног завоја око било ког стопала. Омча не мора бити чврсто затегнута.
2. Обмотајте је око супротног стопала тако да се стопала додирују, чиме се пружа ротациона стабилност. Током обмотавања, причврстите беле кукице за црну тканину.
3. Наставите са умотавањем до краја еластичног завоја и причврстите беле кукице испод етикете за црну тканину.
4. Ако је потребно, упишите време примене у предвиђено поље на етикети. (Као и други еластични компресиони завоји, и овај се може користити за ограничавање крварења.)



SCAN ME

Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

RESCUE ESSENTIALS

НАМЕНА:

Slishman Traction Splint је медицинско средство намењено за употребу од стране здравствених радника за имобилизацију и затезање прелома бутне кости. Медицинско средство се може користити и као једноставна удлага за преломе, истегнућа или уганућа екстремитета

УПОЗОРЕЊА:

Slishman Traction Splint се може користити за имобилизацију било које повреде као основна удлага. Затезање се може узети у обзир код прелома кука, карлице или надлактице ако пробно повлачење ужета за затезање пружи тренутно ублажавање бола или поновно успостављање прокрвљености. Такође, треба избегавати затезање код отворених и контаминираних прелома због повећаног ризика од уношења контаминаната у тело.

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Сваки озбиљан инцидент у вези са овим медицинским средством треба пријавити компанији Tri-Tech Forensics и надлежном органу државе чланице у којој је корисник и/или пацијент регистрован.

УПУТСТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ:

Након сваке употребе, потребно је прегледати Slishman Traction Splint и проверити да ли је у исправном стању. Удлага се мора темељно опрати водом и дезинфекционим средством, а затим обрисати чистом крпом. Ако дође у контакт са токсинима као што су органофосфати, радиоактивни материјал или прекомерне количине телесних течности, удлага се мора одложити према прописаним упутствима за одлагање опасних материјала или биолошког отпада. Ако се може опрати и дезинфиковати, поновна употреба је прихватљива. Немојте користити избељивач. Немојте скидати ни попуштати траке приликом чишћења. Трака неопрене на спољној цеви не сме се прати врућом водом, јер то може изазвати скупљање или одвајање материјала. Уместо тога, темељно обришите траку дезинфекционим марамицама. STS не треба поново користити ако је веома контаминанан, ако чишћење захтева велики труд или ако је средство или неки његов механизам оштећен током употребе. Rescue Essentials ће заменити сваки Slishman Traction Splint који се користи за обуку у случају оштећења или кvara услед интензивне употребе.

КОМПОНЕНТЕ СРЕДСТВА STS-C



Произвођач: Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials, 3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 САД

REF #10-1270

NSN #6515-01-694-7603

Бр. патента: САД 11.324.624 В2, датум патента: 05102022

Произведено под САД патентима: 10.517.750 и 11.324.624

Европски патент (DE, FR, UK) бр. 3226817

• Канадски патент 3007222



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Холандија

MD	Медицинско средство	UDI	Јединствени идентификатор уређаја	EC REP	Овлашћени заступник за ЕУ	SN	Серијски број	LOT	Број лота	Датум производње
LATEX	Није произведено од природног латекса	Произвођач	Погледајте упутство за употребу	LOT	Број лота					