

Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

UPUTE ZA UPORABU

RESCUE ESSENTIALS

*Za djecu ili odrasle s istodobnom ozljedom donjih ekstremiteta preskočite ovaj korak.



1. Ako je pacijent viši od 5 ft (1,5 m), izvlačite srednju srebrnu cijev iz vanjske crne cijevi dok se gumb s oprugom ne zaključa u srednjoj ili proksimalnoj rupi.



2. Na gležanj pričvrstite neoprenski remen vanjske cijevi. U slučaju istodobne ozljede donjih ekstremiteta pričvrstite remen proksimalno na list ili patelu.




3. Crveni remen za preponu pričvrstite oko gornjeg dijela bedra.



4. Nježno povlačite užu za trakciju dok bol ne popusti.



5. Blokirate užu na mjestu povlačeći ga prema dolje u V-urez na vrhu unutrašnje cijevi.

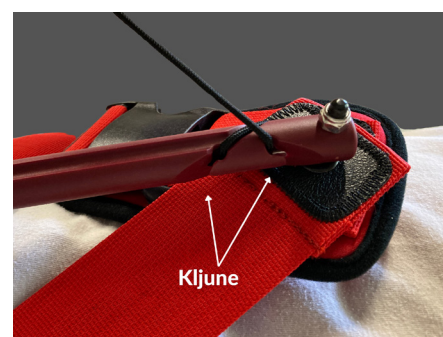

6. Slobodni kraj užu za trakciju omotajte oko obje kljune da biste ga pričvrstili.



7. Stabilizirajte* i podložite ozlijeđeni ekstremitet radi udobnosti.



8. Pomno pratite cirkulaciju, senzorne i motorne funkcije (CSM) te po potrebi podesite.



Napomena: ako je riječ o djetetu ili nižem pacijentu, po potrebi produljite remen za preponu da bi bolje pristajao.

*Stabilizacija se može postići raznim predmetima, uključujući jastuke, pokrivače, remenje za nosila, vakuumske udloge, savitljive udloge ili trostrane udloge. Uz proizvod se isporučuje Slishman Pressure Wrap za bolju rotacijsku stabilnost primjenom sljedećeg postupka:

1. Zahvatite bilo koje stopalo omčom na elastičnom zavoju. Omča ne mora tijesno pristajati uz stopalo.
2. Omotajte suprotno stopalo tako da stopala budu jedno uz drugo i da se tako postigne rotacijska stabilnost. Tijekom omatanja pričvršćujte bijele kukice za narančastu tkaninu.
3. Nastavite motati do kraja elastičnog zavoja te ga pričvrstite bijelim kukicama za narančastu tkaninu ispod etikete.
4. Zapišite vrijeme primjene u prostor na etiketi ako smatrate da je korisno. (Zavoj se može upotrijebiti i za ograničavanje krvarenja kao svaki drugi elastični kompresijski zavoj.)



Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

UPUTE ZA UPORABU

RESCUE ESSENTIALS

NAMJENA:

Slishman Traction Splint namijenjen je zdravstvenim radnicima za upotrebu pri stabilizaciji i trakciji slomljene bedrene kosti. Proizvod se može upotrebljavati i kao jednostavna udlaga za svaki prijelom, istegnuće ili uganuće ekstremiteta.

UPOZORENJA:

Slishman Traction Splint može se upotrebljavati za imobilizaciju svake ozljede kao osnovna udlaga. Za prijelome kuka, zdjelice ili ramene kosti može se primijeniti trakcija ako se testnim povlačenjem uža za trakciju odmah umanju bol ili vrati prokrvljenost. U slučaju jako otvorenih i kontaminiranih prijeloma valja izbjegavati trakciju ako bi se njome mogli kontaminanti uvući u tijelo.

NAPOMENA:

Svi ozbiljni incidenti povezani s ovim proizvodom moraju se prijaviti tvrtki Tri-Tech Forensics te nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent ima boravište odnosno poslovni nastan.

UPUTE ZA ČIŠĆENJE:

Nakon svake upotrebe potrebno je provjeriti je li udlaga Slishman Traction Splint i dalje u dobrom radnom stanju. Udlagu je potrebno temeljito očistiti vodom i dezinfekcijskim sredstvom, a potom obrisati čistom krpom. Ako dođe u doticaj s otrovnim tvarima, kao što su organofosfati, radioaktivnim materijalima ili većom količinom tjelesnih tekućina, udlagu je potrebno odložiti u otpad u skladu s uputama za odlaganje opasnih materijala ili biološkog otpada. Ako se može oprati i dezinficirati, može se ponovno upotrebljavati. Nemojte upotrebljavati izbjeljivač. Prilikom čišćenja nemojte uklanjati ni olabavljivati remenje. Neoprenski remen vanjske cijevi ne smije se čistiti vrućom vodom jer bi to moglo uzrokovati skupljanje ili raslojavanje. Remen umjesto toga temeljito prebrišite dezinfekcijskim maramicama. STS valja baciti ako je jako kontaminiran, ako je za čišćenje potreban velik napor ili ako su proizvod ili bilo koji od njegovih mehanizama oštećeni tijekom upotrebe. Rescue Essentials zamijenit će svaki Slishman Traction Splint koji se upotrebljava za obuku, a pri čijoj neprekidnoj upotrebi dođe do habanja ili pucanja.

KOMPONENTE STS 2. GENERATION



Proizvodi Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 SAD



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Nizozemska

REF #10-5000

NSN u postupku

SAD patenti: 10.517.750 i 11.324.624



MD	Medicinski proizvod	UDI	Jedinstveni identifikator proizvoda	EC REP	Ovlašteni predstavnik za Europu	SN	Serijski broj		Datum proizvodnje
LATEX	Nije izrađeno od prirodnih guma		Proizvođač		Pročitajte upute za uporabu	LOT	Broj serije		