

Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

BRUGERVEJLEDNING

RESCUE ESSENTIALS

*For børn eller voksne med samtidig skade på underekstremiteterne springes dette trin over.



1. For patienter, der er højere end 5 ft (1,5 m), trækkes det sølvfarvede midterste rør fra det sorte ydre rør, indtil fjederknappen klikker i enten det midterste eller det proksimale hul.



4. Træk forsigtigt i snoren for at skabe træk, indtil smerten er lindret.



7. Stabiliser* og polstr det skadede ben, så det bliver behageligt.




2. Sæt den ydre rørstrop af neoprene godt fast på anklen. I tilfælde af samtidig skade på underekstremiteterne anbringes stroppen proksimalt for læggen eller knæskallen.



5. Fastgør snoren ved at trække den ned i V-hakket øverst på det indre rør.



3. Sæt den røde lyskestrop på, og juster den, indtil den sidder tæt omkring låret.

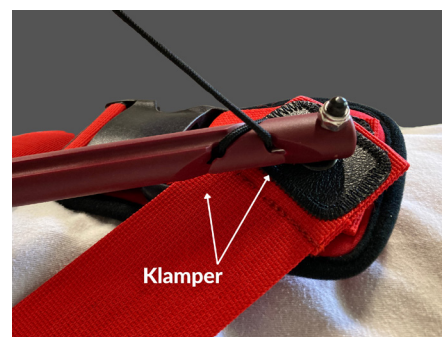

6. Fastgør den løse ende af træksnoren ved at vikle den en gang rundt om begge klampevinger.



8. Overvåg cirkulation, følelse og motorisk funktion (CSM) nøje, og juster efter behov.



Bemærk: For kortere patienter eller små børn kan lyskestrop om nødvendigt forlænges for at få en bedre pasform.

*Stabilisering kan opnås med flere ting, herunder puder, tæpper, backboard-stropper, vakuumskiner, formbare skinner eller boksskiner. Slishman Pressure Wrap er inkluderet for at hjælpe med rotationsstabilitet ved hjælp af følgende trin:

1. Bind begge fødder sammen med løkken på det elastiske bånd. Løkken behøver ikke at være stram.
2. Vikl båndet rundt om den modsatte fod, så de to fødder ligger ved siden af hinanden og dermed giver rotationsstabilitet. Sæt de hvide kroge fast i det orange stof, mens du vikler rundt.
3. Fortsæt med at vikle rundt til enden af elastikken, og sæt de hvide kroge under etiketten fast på det orange stof.
4. Skriv påføringstiden i feltet på etiketten, hvis det skønnes nyttigt. (Båndet kan også bruges til at begrænse blødning som med enhver elastisk trykbandage.)



Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

BRUGERVEJLEDNING

RESCUE ESSENTIALS

TILSIGTET FORMÅL:

Slishman Traction Splint er beregnet til brug af sundhedspersonale til stabilisering og traktion af lårbensbrud. Enheden kan også bruges som en simpel skinne til brud, forstrækninger eller forstuvninger i alle ekstremiteter.

ADVARSLER:

Slishman Traction Splint kan bruges som en grundlæggende skinne til at hjælpe med at immobilisere enhver skade. Traktion kan overvejes ved hofte-, bækken- eller humerusfrakturer, hvis et testtræk i træksnor giver øjeblikkelig smertelindring eller genoprettelse af blodgennemstrømning. Traktion bør undgås ved store åbne og kontaminerede frakturer, hvor traktion kan risikere at trække kontaminanter ind i kroppen.

BEMÆRK:

Enhver alvorlig hændelse, der er sket i forbindelse med denne enhed, skal rapporteres til Tri-Tech Forensics og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren og/eller patient er etableret.

RENGØRINGSVEJLEDNING:

Efter hver brug skal Slishman Traction Splint inspiceres for at sikre, at den stadig er i god stand. Skinnen skal rengøres grundigt ved at vaske den med vand og desinfektionsmiddel og derefter tørres af med en ren klud. Hvis skinnen kommer i kontakt med giftstoffer som organofosfater, radioaktivt materiale eller store mængder kropsvæsker, skal den bortskaffes på samme måde som farligt materiale eller biologisk affald. Hvis den kan vaskes og desinficeres, er genbrug acceptabelt. Brug ikke blegemiddel. Fjern eller løsn ikke stropper i forbindelse med rengøring. Den ydre rørstrop af neoprene må ikke rengøres med varmt vand, da det kan medføre krympning eller delaminering. Tør i stedet stroppen grundigt af med desinficerende servietter. STS skal betragtes som engangsudstyr, hvis den er meget forurenet, hvis rengøring kræver en stor indsats, eller hvis enheden eller en af dens mekanismer er blevet beskadiget ved brug. Rescue Essentials erstatter enhver Slishman Traction Splint, der bruges til træning, og som bliver slidt eller går i stykker på grund af kontinuerlig brug.

KOMPONENTER TIL STS GENERATION 2



Fremstillet af Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials,
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague Holland

REF #10-5000

NSN afventer

Patenter fra USA: 10,517,750 og 11,324,624



MD	Medicinsk udstyr	UDI	Unik enhedsidentifikator	EC REP	Autoriseret europaisk repræsentant	SN	Serienummer		Dato for fremstilling
LATEX	Ikke fremstillet med naturlig gummilatex		Producent		Se instruktioner	LOT	Partinummer		

