


Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

RESCUE ESSENTIALS

*Овај корак се прескаче код деце и одраслих који имају додатне повреде доњег екстремитета.

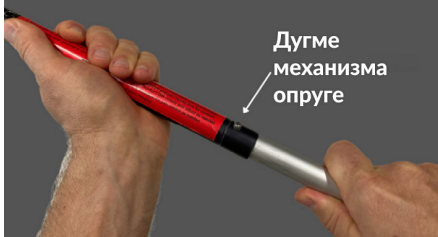

1. Код пацијената виших од 1,5 m (5 ft), извучите сребрну средњу цев из црне спољне цеви све док се дугме механизма опруге не закачи за средњи или проксимални отвор.



4. Лагано повлачите ужу за затезање све док се бол не ублажи.




7. Имобилизите* повређену ногу и ублажите бол помоћу меких облога.




2. Чврсто затегните траку неопрене на спољној цеви око чланка. У случају истовремене повреде доњег екстремитета, поставите траку непосредно изнад листа или пателе.




5. Фиксирајте ужу повлачењем надолу у V-зarez на врху унутрашње цеви.

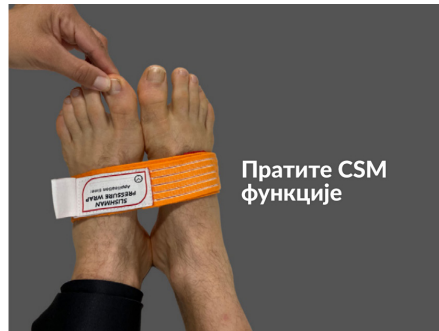

8. Редовно проверавајте циркулацију, сензорне и моторне функције (CSM) екстремитета и по потреби подесите.

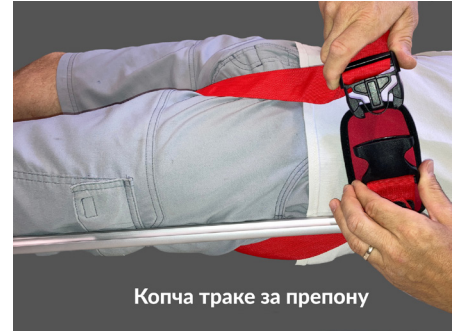

3. Ставите црвену траку за препону и подесите је тако да чврсто обухвати горњи део бутине.

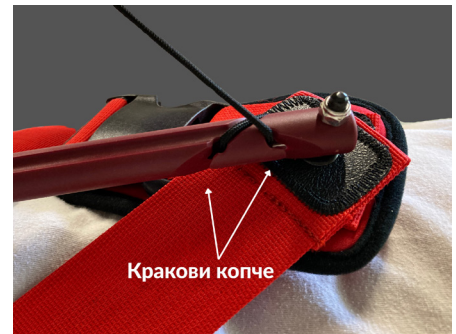

6. Обмотајте слободни крај ужета за затезање једном око оба крака копче да бисте га обезбедили.



Напомена: Код нижих пацијената или мале деце, продужите траку за препону по потреби како би била боље постављена.

*Стабилизација се може остварити многим средствима, укључујући јастуке, ћебад, каишеве за фиксирање на дасци за превоз, вакуумске удлаге, савитљиве удлаге или кутијасте удлаге. Slisman Pressure Wrap се додаје за ротациону стабилност на основу следећих корака:

1. Ставите омчу еластичног завоја око било ког стопала. Омча не мора бити чврсто затегнута.
2. Обмотајте је око супротног стопала тако да се стопала додирују, чиме се пружа ротациона стабилност. Током обмотавања, причврстите беле кукице за наранџасту тканину.
3. Наставите са умотавањем до краја еластичног завоја и причврстите беле кукице испод етикетe за наранџасту тканину.
4. Ако је потребно, упишите време примене у предвиђено поље на етикетe. (Као и други еластични компресиони завоји, и овај се може користити за ограничавање крварења.)



Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

RESCUE ESSENTIALS

НАМЕНА:

Slishman Traction Splint је медицинско средство намењено за употребу од стране здравствених радника за имобилизацију и затезање прелома бутне кости. Медицинско средство се може користити и као једноставна удлага за преломе, истегнућа или уганућа екстремитета

УПОЗОРЕЊА:

Slishman Traction Splint се може користити за имобилизацију било које повреде као основна удлага. Затезање се може узети у обзир код прелома кука, карлице или надлактице ако пробно повлачење ужета за затезање пружи тренутно ублажавање бола или поновно успостављање прокрвљености. Такође, треба избегавати затезање код отворених и контаминираних прелома због повећаног ризика од уношења контаминаната у тело.

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Сваки озбиљан инцидент у вези са овим медицинским средством треба пријавити компанији Tri-Tech Forensics и надлежном органу државе чланице у којој је корисник и/или пацијент регистрован.

УПУТСТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ:

Након сваке употребе, потребно је прегледати Slishman Traction Splint и проверити да ли је у исправном стању. Удлага се мора темељно опрати водом и дезинфекционим средством, а затим обрисати чистом крпом. Ако дође у контакт са токсинима као што су органофосфати, радиоактивни материјал или прекомерне количине телесних течности, удлага се мора одложити према прописаним упутствима за одлагање опасних материјала или биолошког отпада. Ако се може опрати и дезинфиковати, поновна употреба је прихватљива. Немојте користити избељивач. Немојте скидати ни попуштати траке приликом чишћења. Трака неорепе на спољној цеви не сме се прати врућом водом, јер то може изазвати скупљање или одвајање материјала. Уместо тога, темељно обришите траку дезинфекционим марамицама. STS не треба поново користити ако је веома контаминанан, ако чишћење захтева велики труд или ако је средство или неки његов механизам оштећен током употребе. Rescue Essentials ће заменити сваки Slishman Traction Splint који се користи за обуку у случају оштећења или кvara услед интензивне употребе.

КОМПОНЕНТЕ СРЕДСТВА STS GENERATION 2



Произвођач: Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials 3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 САД



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague Холандија

REF #10-5000

Додела NSN броја у току

Патенти у САД: 10.517.750 и 11.324.624



MD	Медицинско средство	UDI	Јединствени идентификатор уређаја	EC REP	Овлашћени заступник за ЕУ	SN	Серијски број		Датум производње
LATEX	Није произведено од природног латекса		Произвођач		Погледајте упутство за употребу	LOT	Број лота		

NORTH CAROLINA САД 910-830-0286



info@rescue-essentials.com